B M 7, B P 7

Ghid de utilizare

Made for
iPhone | iPad

Audio Service

Cuprins

Bine ați venit **4**

Aparatele dumneavoastră auditive **5**

Tip de aparat auditiv 5

Familiarizarea cu aparatele dumneavoastră auditive 6

Componente şi nume 7

Comenzi 9

Programe auditive 10

Funcţii 10

Baterii **11**

Dimensiunea bateriei şi sfaturi privind manipularea 11

Înlocuirea bateriilor 12

Funcţie de protecţie împotriva falsificării (opţional) 13

Utilizare zilnică **15**

Pornire şi oprire 15

Mod standby (de aşteptare) 16

Inserarea și detașarea aparatelor auditive 17

Reglarea volumului 21

Schimbarea programului auditiv 22

Reglări suplimentare (opțional) 22

Situaţii de ascultare speciale **23**
La telefon 23
Flux de date (streaming) audio 23
Flux de date (streaming) audio cu iPhone 24
Flux de date (streaming) audio cu telefon Android 24
Bluetooth 24
Bucle de inducţie audio (opţional) 25

Întreținere și îngrijire **26**
Aparate auditive 26
Căşti şi tuburi 27
Întreţinere profesională 30

Informaţii suplimentare **31**
Informaţii privind siguranţa 31
Accesorii 31
Explicarea simbolurilor 31
Condiţii de operare, transport şi depozitare 32
Identificarea și soluționarea problemelor 33
Informaţii specifice fiecărei ţări 34
Service și garanție 35

Bine ați venit

Vă mulțumim pentru alegerea instrumentelor noastre auditive, care vă vor însoți în viața de zi cu zi. Ca în cazul oricărui lucru nou, va fi necesar un anumit interval de timp să vă familiarizați cu acestea.

Acest ghid, împreună cu asistența oferită de audiologul dumneavoastră, vă va ajuta să înțelegeți avantajele și calitatea mult mai bună a vieții oferite de instrumentele dumneavoastră auditive.

Pentru a beneficia cât mai mult de instrumentele dumneavoastră auditive, se recomandă să le purtați zilnic, pe parcursul întregii zile. Acest ghid vă va ajuta să vă obișnuiți cu acestea.

ATENŢIE

Este important să citiți ghidul de utilizare și manualul de siguranță cu atenție și în întregime. Respectați informațiile de siguranță pentru a evita daunele sau rănirea.

Este posibil ca dispozitivul să nu arate exact ca ilustraţiile orientative din aceste instrucţiuni. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări pe care le considerăm necesare.

Aparatele dumneavoastră auditive

Acest ghid de utilizare descrie funcțiile opționale pe care aparatele dumneavoastră auditive le pot avea sau nu.

Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru aparatele dumneavoastră auditive.

Tip de aparat auditiv

Aparatele dumneavoastră auditive sunt modele BTE (Behind-The-Ear (În spatele urechii)). Un tub furnizează sunetul de la aparatul auditiv în ureche. Aparatele auditive nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

Funcționalitatea wireless permite funcții audiologice avansate și sincronizare între cele două aparate auditive.

Aparatele dvs. auditive dispun de Bluetooth® Low Energy* tehnologie care permite schimbul de date ușor cu smartphone-ul dumneavoastră și pentru redarea audio fluentă cu iPhone-ul dumneavoastră** și pentru unele smartphone-uri Android care acceptă Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA).

Reţineţi că funcţia Bluetooth nu este disponibilă la toate nivelurile de performanţă.

* Marca Bluetooth și logo-urile sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către WS Audiology Denmark A/S se face sub licență. Alte mărci comerciale și mărci înregistrate aparțin deținătorilor respectivi.

** iPad®, iPad Air®, iPad Pro® și iPhone® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni.

Familiarizarea cu aparatele dumneavoastră auditive

Se recomandă să vă familiarizați cu noile aparate auditive. Cu aparatele auditive în mână încercați să utilizați comenzile și să observați amplasarea acestora pe aparatul auditiv. Acest lucru va simplifica sarcina de a simți și apăsa comenzile în timp ce purtați aparatele auditive.

Dacă întâmpinați probleme la apăsarea butoanelor de comandă ale aparatelor auditive în timp ce le purtați, consultați-vă cu audiologul dumneavoastră pentru a afla dacă este disponibilă o telecomandă sau o aplicație de smartphone pentru controlarea aparatelor auditive.

Componente şi nume

Aparatele dumneavoastră auditive sunt atașate la un dispozitiv de fixare în ureche și o cască făcută la comandă sau la un tub standard și o cască standard.



❶ Cască	❺ Dispozitiv de fixare în ureche
❷ Tub	❻ Compartiment baterie (întrerupător de pornire/ oprire)
❸ Orificii pentru microfon	❼ Indicator lateral (roşu = urechea dreaptă, albastru = urechea stângă)
❹ Întrerupător rectangular	

Puteţi utiliza căşti standard împreună cu un tub standard sau căşti făcute la comandă împreună cu un dispozitiv de fixare în ureche şi tub.

Puteţi schimba cu uşurinţă căştile standard şi curăţa la fel de uşor tubul standard. Citiţi mai multe în secţiunea „Întreţinere şi îngrijire”.

Puteţi utiliza următoarele căşti standard:

Căşti standard		Dimensiune
○	 Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power	
○	 Eartip 3.0 Open	
○	 Eartip 3.0 Tulip	

Puteţi schimba cu uşurinţă căştile standard. Citiţi mai multe în secţiunea „Întreţinere şi îngrijire”.

Căşti făcute la comandă	
○	 Earmold 3.0

Comenzi

Cu ajutorul întrerupătorului rectangular, puteţi, de exemplu, să comutaţi programele auditive. Audiologul a programat funcţiile dorite de dumneavoastră pentru întrerupătorul rectangular.

Funcția întrerupătorului rectangular	**L**	**R**
Apăsați scurt:		
Program sus/jos	○	○
Mărire/micşorare volum	○	○
Creștere/reducere semnal terapie tinitus	○	○
Activare/dezactivare streaming TV	○	○
Apăsați timp de aproximativ 2 secunde:		
Program sus/jos	○	○
Mărire/micşorare volum	○	○
Creștere/reducere semnal terapie tinitus	○	○
Activare/dezactivare streaming TV	○	○

L = Stânga, R = Dreapta

De asemenea, puteți utiliza o telecomandă pentru a modifica programele auditive și ajusta volumul aparatelor auditive. Cu aplicația noastră de smartphone, aveți și mai multe opțiuni de control.

Programe auditive

1
2
3
4
5
6

Citiţi mai multe în secţiunea „Schimbarea programului auditiv”.

Funcţii

- ◯ **Funcţia de terapie tinitus** generează un sunet pentru a vă distrage atenţia de la tinitusul dumneavoastră.
- ◯ O **telebobină** este integrată în aparatul dumneavoastră auditiv pentru a se conecta cu buclele de inducție audio.

  Citiți mai multe în secțiunea „Buclele de inducție audio”.

Baterii

Când capacitatea bateriei este redusă, sunetul devine mai slab sau veţi auzi un semnal de alarmă. Tipul bateriei determină durata de utilizare a acesteia înainte de fi înlocuită.

Dimensiunea bateriei şi sfaturi privind manipularea

Consultaţi audiologul pentru bateriile recomandate.

Dimensiune baterie:	13

- Utilizaţi întotdeauna dimensiunea de baterie corectă pentru aparatele dumneavoastră auditive.
- Scoateţi bateriile dacă intenţionaţi să nu utilizaţi aparatele auditive timp de câteva zile.
- Luaţi întotdeauna la dumneavoastră baterii de rezervă.
- Înlocuiţi imediat bateriile descărcate şi eliminaţi-le în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea.


Înlocuirea bateriilor

Scoaterea bateriei:

- Deschideţi compartimentul pentru baterie.



- Utilizaţi bagheta magnetică pentru a scoate bateria. Bagheta magnetică este disponibilă ca accesoriu.

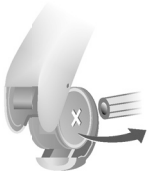

Introducerea bateriei:

- Dacă bateria are o folie de protecție, îndepărtați-o doar când sunteți pregătit/ă să utilizați bateria.



- Introduceți bateria cu simbolul „+” orientat în sus în capacul compartimentului pentru baterie (consultați imaginea).

  Notă: Vă rugăm să nu așezați acumulatorul direct în carcasă.



▶ Închideți cu atenție capacul bateriei pentru că se poate deteriora.



Împingeți doar la unghi drept și în zona indicată în imagine. Nu folosiți forța.

Dacă simțiți rezistență, bateria nu este introdusă corect.

Funcţie de protecţie împotriva falsificării (opţional)

Adresaţi-vă audiologului dumneavoastră pentru a activa funcţia de protecţie împotriva falsificării.

Poziţia OFF (oprit) atunci când nu este utilizat:


▶ Compartimentul pentru baterii poate fi deschis cu uşurinţă cu câţiva milimetri pentru a opri aparatul auditiv.

Pentru a vă asigura că aparatul auditiv este depozitat în siguranţă în apropierea copiilor, compartimentul pentru baterii trebuie deschis în poziţia OFF (oprit) atunci când aparatul auditiv nu este utilizat.

Deschideţi complet compartimentul bateriei numai atunci când schimbaţi bateria.

Cum se deschide compartimentul pentru baterie:

- Aşezaţi o cârpă mică sau un şerveţel peste mânerul compartimentului pentru baterii.
- Deschideţi capacul cu degetul mare, aşa cum se arată în ilustraţie.

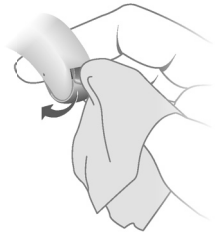

Forţa necesară pentru a deschide capacul este mai mare decât în cazul setării de protecţie împotriva falsificării.

Utilizare zilnică

Pentru a asigura utilizarea confortabilă și ușoară a aparatelor auditive, acestea sunt echipate cu un element de comandă integrat.

În plus, oferim o aplicație pentru Android și iPhone, care face manipularea dispozitivelor chiar mai ușoară. Pentru a descărca și a instala aplicația pentru smartphone, luați legătura cu audiologul dumneavoastră.

Pornire şi oprire

Puteți porni sau opri aparatele auditive prin intermediul compartimentului bateriei:

- Pornire: Închideți compartimentul pentru baterii.

  Sunt setate volumul şi programul auditiv **implicite**.
- Oprire: Deschideți compartimentul bateriei până la primul limitator.



Când este activată **funcția de pornire cu întârziere**, aparatele auditive pornesc după o întârziere de câteva secunde. În acest timp, puteți introduce instrumentele auditive în urechi fără a experimenta un țiuit de feedback neplăcut.

„Funcția de pornire cu întârziere” poate fi activată de audiologul dumneavoastră.

Mod standby (de aşteptare)

Modul standby dezactivează aparatele auditive. Acestea nu sunt oprite complet, dar încă mai consumă energie. Drept urmare, recomandăm utilizarea modului standby doar pentru o scurtă perioadă de timp.

Cum să treceți în modul standby:

- cu ajutorul telecomenzii
- cu ajutorul întrerupătorului rectangular

  Apăsați și țineți apăsat întrerupătorul rectangular pentru câteva secunde.

Ieșirea din modul standby:

- Sunt setate volumul și programul auditiv utilizate anterior.
- Dacă doriți să părăsiți modul standby, dar telecomanda nu vă este la îndemână, opriți și reporniți dispozitivul (prin deschiderea și închiderea compartimentului bateriei). În acest caz, sunt setate volumul și programul auditiv implicite.

Inserarea și detașarea aparatelor auditive

Aparatele dumneavoastră auditive au fost reglate cu precizie pentru urechea dreaptă și urechea stângă. Marcatoarele colorate indică partea:




- marcator = urechea dreaptă
- marcator albastru = urechea stângă

Introducerea unui aparat auditiv:

- ▶ Țineți tubul aproape de cască.
- ▶ Împingeți cu grijă casca în canalul urechii ❶.
- ▶ Răsuciți-l ușor până când se fixează bine.

  Deschideți și închideți gura pentru a evita acumularea de aer în canalul urechii.
- ▶ Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❷.

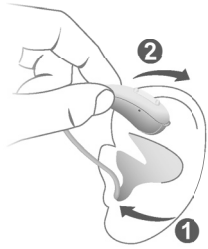

ATENŢIE

Risc de rănire!

- ▶ Introduceţi componenta pentru ureche cu atenţie şi nu prea adânc în ureche.

- Poate fi util să introduceți instrumentul auditiv din dreapta cu mâna dreaptă și instrumentul auditiv din stânga cu mâna stângă.
- Dacă aveți probleme la introducerea căștii, utilizați cealaltă mână pentru a trage ușor de lobul urechii în jos. Astfel, canalul urechii se deschide și casca este introdusă cu ușurință.

Firul opțional de fixare ajută la fixarea sigură a căștii în ureche. Pentru a atașa fluxul opțional de fixare:

Concha Lock Sleeve 3.0

▶ Aliniați Concha Lock Sleeve 3.0 cu receptorul, așa cum este indicat în imagine. Apoi glisați Concha Lock Sleeve 3.0 peste receptor, astfel încât să se fixeze bine.



Concha Lock 3.0

- Aliniați capătul fluxului de fixare cu capătul plat al receptorului.



- Apoi apăsați pe fluxul de fixare către receptor până se fixează, moment în care se aude un clic.




Pentru a poziționa firul de fixare:

- Îndoiți firul de fixare şi poziționați-l cu atenție în baza cavității urechii (consultați imaginea).



Îndepărtarea unui aparat auditiv:

- Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❶.
- Țineți tubul aproape de cască și trageți casca afară cu atenție ❷.

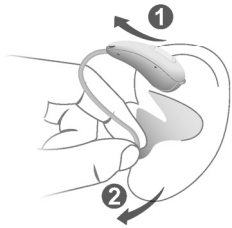

ATENŢIE

Pericol de rănire!

- În cazuri foarte rare, componenta pentru ureche poate rămâne în urechea dumneavoastră atunci când scoateți aparatul auditiv. Într-un astfel de caz, apelați la un medic pentru scoaterea căștii.

Curățați și uscați aparatele auditive după utilizare. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Reglarea volumului

Aparatele dumneavoastră auditive reglează automat volumul în funcție de situația de ascultare.

▶ Dacă preferaţi reglarea manuală a volumului, apăsaţi partea superioară a întrerupătorului rectangular pentru a mări volumul sau apăsaţi partea inferioară pentru a micşora volumul.

  Consultaţi secţiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Un semnal opţional poate indica schimbarea volumului. După atingerea volumului maxim sau minim, puteţi auzi un ton de semnal opţional.

Schimbarea programului auditiv

În funcție de situația de ascultare, aparatele dumneavoastră auditive își reglează automat sunetul.

Aparatele auditive pot avea, de asemenea, mai multe programe auditive care vă permit să schimbați sunetul, dacă este necesar. Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea programului.

- Pentru a schimba programul auditiv, apăsaţi scurt întrerupătorul rectangular.

  Consultaţi secţiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular. Consultaţi secţiunea „Programe auditive” pentru o listă a programelor auditive.

Volumul implicit este aplicat.

Reglări suplimentare (opțional)

Puteți, de asemenea, utiliza comenzile aparatului auditiv pentru a modifica și alte funcții, de exemplu, nivelul semnalului de terapie pentru tinitus.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor.

Situaţii de ascultare speciale

La telefon

Când vorbiți la telefon, țineți receptorul telefonului ușor deasupra urechii. Aparatul auditiv și receptorul telefonului trebuie să fie aliniate. Întoarceți ușor receptorul astfel încât urechea să nu fie complet acoperită.



Program telefonic

Puteți prefera un anumit volum când utilizați telefonul. Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program telefonic.

- Comutați la programul telefonic de fiecare dată când vorbiți la telefon.

  Secțiunea „Programe auditive” listează dacă un program telefonic este configurat pentru aparatele dumneavoastră auditive.

Flux de date (streaming) audio

Următoarele informații despre streamingul audio **nu** se aplică tuturor modelelor de aparate auditive. Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru aparatele dumneavoastră auditive.

Flux de date (streaming) audio cu iPhone

Aparatele dvs. auditive sunt aparate auditive Made for iPhone. Acest lucru înseamnă că puteți primi apeluri telefonice și asculta muzică de la iPhone direct în aparatele auditive.

Pentru mai multe informații privind dispozitivele iOS compatibile, împerecherea, streamingul audio și alte funcții utile, contactați audiologul dumneavoastră.

Flux de date (streaming) audio cu telefon Android

Dacă telefonul dvs. mobil acceptă Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), puteți primi apeluri telefonice și puteți asculta muzică de pe telefonul mobil direct în aparatele auditive.

Pentru mai multe informații privind dispozitivele Android compatibile, asocierea, streamingul audio și alte funcții utile, contactați audiologul dumneavoastră.

Bluetooth

Dispozitivul dvs. este prevăzut cu Bluetooth®* tehnologie wireless pentru a activa fluxul de date audio de pe telefoanele mobile sau alte dispozitive compatibile.

Într-un avion, utilizarea funcţionalităţii Bluetooth poate fi restricţionată, în special în timpul decolării şi aterizării. În

* Marca Bluetooth şi logo-urile sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către WS Audiology Denmark A/S se face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi mărci înregistrate aparţin deţinătorilor respectivi.

acest caz, puteţi opri tehnologia wireless Bluetooth de pe aparatele dvs. auditive prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone.

Bucle de inducţie audio (opţional)

Unele telefoane și locuri publice precum teatre oferă semnal audio (muzică și vorbire) prin intermediul buclei de inducție audio. Cu acest sistem, aparatele dumneavoastră auditive pot primi direct semnalul dorit – fără zgomotul ambiental.

De obicei, puteți recunoaște sistemele cu buclă de inducție audio după anumite simboluri.



De fiecare dată când vă aflați într-o locație cu buclă de inducție audio:

- Comutați la programul de telebobină.

  Dacă un program de telebobină este configurat pentru aparatele dumneavoastră auditive, acesta este inclus în secțiunea „Hearing programs” (Programe auditive).

Întreținere și îngrijire

Pentru prevenirea deteriorărilor, este important să aveți grijă de aparatele dumneavoastră și să respectați câteva reguli de bază, care vor deveni în curând parte a rutinei dumneavoastră zilnice.

Aparate auditive

Uscarea și depozitarea

- Uscați peste noapte instrumentele auditive.
- În timpul perioadelor lungi de neutilizare, depozitați-vă instrumentele auditive într-un mediu uscat, cu compartimentul bateriei deschis și bateriile scoase.
- Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Curățarea

Aparatele dumneavoastră auditive au un înveliș protector Totuși, dacă acestea nu sunt curățate cu regularitate, se pot defecta sau pot cauza răniri personale.

- Curățați aparatele auditive zilnic folosind un șervețel moale și uscat.
- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți dispozitivele în apă.
- Nu aplicați niciodată presiune în timpul curățării.



- Solicitați audiologului dumneavoastră produse de curățare recomandate, seturi speciale de îngrijire sau informații suplimentare privind modul de păstrare a aparatelor dumneavoastră auditive în bună stare.

Căşti şi tuburi

Cerumenul (ceara din urechi) se poate acumula pe căști. Acest lucru poate afecta calitatea sunetului.

- Pentru aparate auditive cu un tub standard:

  Curățați zilnic partea exterioară a tuburilor cu un șervețel pentru a îndepărta orice resturi.

  Tuburile trebuie schimbate dacă observați deteriorări sau decolorări.

  Nu folosiți produse de curățare care conțin alcool sau substanțe chimice dure, deoarece acestea pot deteriora tuburile.

- Pentru aparate auditive cu un dispozitiv de fixare în ureche:


  Curățați zilnic căștile.

  Solicitați audiologului dumneavoastră să curețe tuburile sau să schimbe căștile și tuburile după cum este necesar.

Curățarea căștilor

- Curățați zilnic piesele pentru ureche cu un șervețel, pentru a îndepărta ceara acumulată din ureche.


  Înlocuiți căștile în cazul în care acestea prezintă semne de deteriorare sau nu pot fi curățate în mod corespunzător.

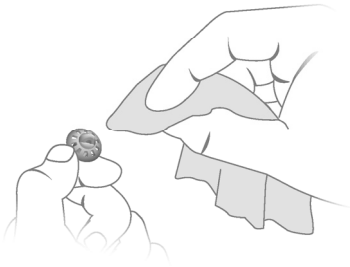

- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți casca în apă.

Schimbarea căştilor standard

- Scoateţi casca utilizată şi conectaţi noua cască.

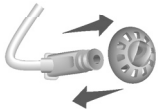

ATENŢIE

Pericol de rănire!

- Purtați întotdeauna tubul cu o cască.
- Asigurați-vă că ați atașat complet casca.

Schimbarea tuburilor standard

▶ Deșurubați tubul utilizat de la instrumentul auditiv.



▶ Înșurubați noul tub.



Întreţinere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreţinea şi curăţarea completă profesională a instrumentului.

Căştile şi filtrele de ceară particularizate trebuie schimbate atunci când este necesar de către un audiolog.

Solicitaţi audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreţinere, precum şi asistenţă.

Informaţii suplimentare

Informaţii privind siguranţa

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de siguranţă furnizat cu dispozitivul.


Accesorii

Puteți utiliza o aplicație pentru smartphone pentru a vă controla aparatele auditive de la distanță (disponibilă în multe țări). Această aplicație vă permite să vă ajustați aparatele auditive de pe smartphone și chiar să vă personalizați experiența auditivă.

Consultați audiologul pentru informații suplimentare.

Explicarea simbolurilor

	Indică o situaţie care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.
	Indică posibile daune materiale.
	Sfaturi, sugestii şi informaţii importante.
	Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene, consultaţi secţiunea „Informaţii privind conformitatea”.
	Indică producătorul legal al dispozitivului.

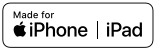

Utilizarea simbolului „Made for Apple” denotă faptul că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) în simbol şi a fost certificat de către dezvoltator ca îndeplinind standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și reglementare.

Condiţii de operare, transport şi depozitare

Condiţii de operare

Temperatură	între 0 şi 50 °C între 32 şi 122 °F
Umiditate relativă	între 5 şi 93 %

În timpul perioadelor extinse de transport şi depozitare, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele condiţii:

	Depozitare	**Transport**
Temperatură	între 10 şi 40 °C între 50 şi 104 °F	între -20 şi 60 °C între -4 şi 140 °F
Umiditate relativă	între 10 şi 80 %	între 5 şi 90 %

Pentru alte componente, precum bateriile, se pot aplica alte condiţii.

Identificarea și soluționarea problemelor

Problema și posibilele soluții

Sunetul este slab.

- Măriţi volumul.
- Înlocuiţi bateria descărcată.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Aparatul auditiv emite sunete fluierate.

- Reintroduceți casca până la fixarea sigură a acesteia.
- Micșorați volumul.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Sunetul este distorsionat.

- Micşoraţi volumul.
- Înlocuiţi bateria descărcată.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Instrumentele auditive emit tonuri de semnal.

- Înlocuiți bateria descărcată.

Instrumentele auditive nu funcționează.

- Porniți instrumentele auditive.
- Închideți ușor și complet compartimentul pentru baterie.
- Înlocuiți bateria descărcată.
- Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.
- Funcţia de pornire cu întârziere este activă. Aşteptaţi câteva secunde şi verificaţi din nou.

Consultaţi-vă audiologul dacă întâmpinaţi alte probleme.

Informaţii specifice fiecărei ţări

SUA şi Canada

Informații de certificare pentru aparatele auditive cu funcționalitate wireless:

B M 7

- HVIN: RFM007
- Conţine FCC ID: 2AXDT-RFM007
- Conţine IC: 26428-RFM007

B P 7

- HVIN: RFM006
- Conţine FCC ID: 2AXDT-RFM006
- Conţine IC: 26428-RFM006

Service și garanție

Numere de serie

Stânga:

Dreapta:

Date de service

1:	4:
2:	5:
3:	6:

Garanție

Data achiziționării:

Perioadă de garanție în luni:

Audiologul dumneavoastră

Producător Legal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemarca

Document No. 05293-99T02-3B00 RO
Order/Item No. 210 255 80
Master Rev02, 11.2024
www.wsaud.com
© 01.2025, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.audioservice.com