P Li-Ion G6

Ghid de utilizare



Cuprins

Bine ați venit **4**

Instrumentele dumneavoastră auditive **5**

Tip instrument 5

Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive 6

Componente și nume 6

Comenzi 9

Programe auditive 10

Funcții 10

Utilizare zilnică **11**

Încărcarea 11

Pornire și oprire 12

Comutarea la modul standby 14

Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive 15

Reglarea volumului 18

Schimbarea programului auditiv 19

Reglări suplimentare (opțional) 19

Situații de ascultare speciale **20**

La telefon 20

Flux de date (streaming) audio cu iPhone 21

Mod avion pentru instrumente auditive 21

Bucle de inducție audio 22

Întreținere și îngrijire **23**
Instrumente auditive 23
Căști și tuburi 25
Întreținere profesională 28

Informații importante privind siguranța **29**

Informații suplimentare **32**
Informații privind siguranța 32
Accesorii 32
Condiții de operare, transport și depozitare 32
Informații privind eliminarea 34
Simboluri utilizate în acest document 34
Identificarea și soluționarea problemelor 35
Informații specifice fiecărei țări 36
Service și garanție 39

Bine ați venit

Vă mulțumim pentru alegerea instrumentelor noastre auditive, care vă vor însoți în viața de zi cu zi. Ca în cazul oricărui lucru nou, va fi necesar un anumit interval de timp să vă familiarizați cu acestea.

Acest ghid, împreună cu asistența oferită de audiologul dumneavoastră, vă va ajuta să înțelegeți avantajele și calitatea mult mai bună a vieții oferite de instrumentele dumneavoastră auditive.

Pentru a beneficia cât mai mult de instrumentele dumneavoastră auditive, se recomandă să le purtați zilnic, pe parcursul întregii zile. Acest ghid vă va ajuta să vă obișnuiți cu acestea.

ATENȚIE
Este important să citiți ghidul de utilizare și manualul de siguranță cu atenție și în întregime. Respectați informațiile de siguranță pentru a evita daunele sau rănirea.

Înainte de a utiliza instrumentele auditive pentru prima dată, încărcați-le complet. Urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare a încărcătorului.

Instrumentele dumneavoastră auditive

Acest ghid de utilizare descrie funcțiile opționale pe care instrumentele dumneavoastră auditive le pot avea sau nu.

Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru instrumentele dumneavoastră auditive.

Tip instrument

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt modele BTE (Behind-The-Ear (În spatele urechii)). Un tub furnizează sunetul de la instrumentul auditiv în ureche. Instrumentele nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

O baterie (baterie reîncărcabilă cu litiu-ion) este permanent integrată în instrumentul auditiv. Acest lucru permite încărcarea ușoară cu încărcătorul nostru standard sau opțional, Charging+ Station.

Funcționalitatea wireless permite funcții audiologice avansate și sincronizare între cele două instrumente auditive.

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt dotate cu Bluetooth® low energy* tehnologie care permite schimbul de date ușor cu smartphone-ul dumneavoastră streamingul audio fluent cu iPhone-ul**.

* Marca Bluetooth și logo-urile sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către producătorul legal al produsului se face sub licență. Alte mărci comerciale și mărci înregistrate aparțin deținătorilor respectivi.

** iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.


Familiarizarea cu instrumentele dumneavoastră auditive

Se recomandă să vă familiarizați cu noile instrumente auditive. Cu instrumentele în mână încercați să utilizați comenzile și să observați amplasarea acestora pe instrument. Acest lucru va simplifica sarcina de a simți și apăsa comenzile în timp ce purtați instrumentele auditive.

Dacă întâmpinați probleme la apăsarea butoanelor de comandă ale instrumentelor auditive în timp ce le purtați, consultați-vă cu audiologul dumneavoastră pentru a afla dacă este disponibilă o telecomandă sau o aplicație de smartphone pentru controlarea instrumentelor.

Componente și nume

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt atașate la un dispozitiv de fixare în ureche și o cască făcută la comandă sau la un tub standard (ThinTube) și o cască standard.

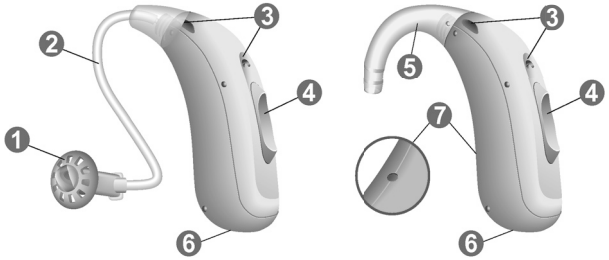

1. Cască
2. Tub (ThinTube)
3. Orificii pentru microfon
4. Întrerupător rectangular (buton de comandă, întrerupător pornire/oprire)
5. Dispozitiv de fixare în ureche
6. Contact de încărcare
7. Indicator lateral


Puteți utiliza căști standard împreună cu un tub standard sau căști făcute la comandă împreună cu un dispozitiv de fixare în ureche și tub.

Puteți schimba cu ușurință căștile standard și curăța la fel de ușor tubul standard. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Căști/tuburi standard	Dimensiune
○  Eartip 3.0 Open	
○  Eartip 3.0 Tulip	
○ ThinTube	

Căști făcute la comandă

○ Exemple:

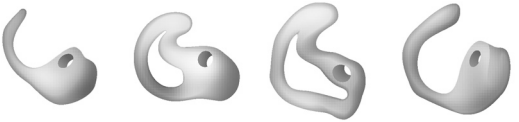

Comenzi

Cu ajutorul întrerupătorului rectangular, puteți, de exemplu, să comutați programele auditive. Audiologul a programat funcțiile dorite de dumneavoastră pentru întrerupătorul rectangular.

Funcția întrerupătorului rectangular	L	R
Apăsați scurt:		
Program sus/jos	○	○
Mărire/micșorare volum	○	○
Creștere/reducere semnal terapie tinitus	○	○
Activare/dezactivare streaming TV	○	○
Apăsați timp de aproximativ 2 secunde:		
Program sus/jos	○	○
Mărire/micșorare volum	○	○
Creștere/reducere semnal terapie tinitus	○	○
Activare/dezactivare streaming TV	○	○
Apăsați timp de mai mult de 3 secunde:		
Pornire/oprire	○	○

L = Stânga, R = Dreapta

De asemenea, puteți utiliza o telecomandă pentru a modifica programele auditive și ajusta volumul instrumentelor auditive. Cu aplicația noastră de smartphone, aveți și mai multe opțiuni de control.

Programe auditive

1
2
3
4
5
6

Citiți mai multe în secțiunea
„Schimbarea programului auditiv”.

Funcții

- ◯ **Funcția de terapie tinitus** generează un sunet pentru a vă distrage atenția de la tinitusul dumneavoastră.
- ◯ O **telebobină** este integrată în instrumentul dumneavoastră auditiv pentru a se conecta cu buclele de inducție audio.

  Citiți mai multe în secțiunea
  „Bucle de inducție audio”.

Utilizare zilnică

Pentru a asigura utilizarea confortabilă și ușoară a instrumentelor auditive, acestea sunt echipate cu un element de comandă integrat. În plus, oferim o aplicație pentru Android și iPhone care face manipularea dispozitivelor chiar mai ușoară. Pentru a descărca și a instala aplicația pentru smartphone, luați legătura cu audiologul dumneavoastră.

Încărcarea

Aveți opțiunea de a alege între două încărcătoare: Încărcătorul standard numai pentru încărcare sau încărcătorul opțional, Charging+ Station.

Amplasați instrumentele auditive în încărcător.

- Urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare a încărcătorului. De asemenea, puteți găsi sfaturi utile privind încărcarea în ghidul de utilizare a încărcătorului.



Indicare putere scăzută

Veți auzi un semnal de alarmă care indică faptul că bateria este aproape consumată. Semnalul va fi repetat la fiecare 20 minute. În funcție de utilizarea instrumentelor auditive, aveți aproximativ 1,5 ore pentru a încărca instrumentele auditive înainte ca acestea să se oprească.

Rețineți că durata de funcționare a acumulatorului este redusă dacă sunt utilizate simultan prea multe caracteristici.

Pornire și oprire

Aveți următoarele opțiuni de pornire și oprire a instrumentelor dumneavoastră auditive.

Prin intermediul încărcătorului:

- Pornire: Scoateți instrumentele din încărcător.

  Melodia de pornire este redată în instrumentele auditive. Sunt setate volumul și programul auditiv **implicite**.

- Oprire: Amplasați instrumentele auditive în încărcător.

Țineți cont că încărcătorul trebuie conectat la sursa de alimentare. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare a încărcătorului.

Cu ajutorul întrerupătorului rectangular:

- Pornire: Apăsați și mențineți apăsată partea inferioară a întrerupătorului rectangular până când melodia de pornire începe să se audă. Eliberați întrerupătorul rectangular în timp ce melodia este redată.



  Sunt setate volumul și programul auditiv **implicite**.

- Oprire: Apăsați și țineți apăsat partea superioară sau inferioară a întrerupătorului rectangular timp de câteva secunde. O melodie de oprire începe să se audă.



Consultați, de asemenea, sfaturile privind încărcarea din ghidul de utilizare a încărcătorului.

Comutarea la modul standby

Prin intermediul telecomenzii sau aplicației pentru smartphone, puteți comuta instrumentele auditive în modul standby. Astfel, acestea vor fi dezactivate. Când ieșiți din modul standby, sunt setate programul auditiv și volumul utilizate **anterior**.

Notă:

- În modul standby, instrumentele auditive **nu** sunt oprite complet. Acestea vor continua să consume o anumită cantitate de energie.

  Drept urmare, recomandăm utilizarea modului standby doar pentru o scurtă perioadă de timp.

- Dacă doriți să părăsiți modul standby, dar telecomanda sau aplicația nu sunt la îndemână: Opriți și reporniți instrumentele auditive (cu ajutorul întrerupătorului rectangular sau introducându-le în încărcător pentru scurt timp, până când unul sau mai multe LED-uri verzi se aprind). În acest caz, sunt setate volumul și programul auditiv **implicite**.

Introducerea și scoaterea instrumentelor auditive

Instrumentele dumneavoastră auditive au fost reglate cu precizie pentru urechea dreaptă și urechea stângă. Marcatoarele colorate indică partea:




- marcator roșu = urechea dreaptă
- marcator albastru = urechea stângă

Introducerea unui instrument auditiv:

- ▶ Țineți tubul aproape de cască.
- ▶ Împingeți cu grijă casca în canalul urechii ❶.
- ▶ Răsuciți-o ușor până când se fixează bine.

  Deschideți și închideți gura pentru a evita acumularea de aer în canalul urechii.
- ▶ Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❷.

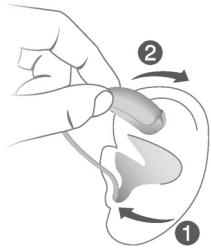

ATENȚIE

Risc de rănire!

- ▶ Introduceți componenta pentru ureche cu atenție și nu prea adânc în ureche.

- Poate fi util să introduceți instrumentul auditiv din **dreapta** cu mâna **dreaptă** și instrumentul auditiv din **stânga** cu mâna **stângă**.
- Dacă aveți probleme la introducerea căștii, utilizați cealaltă mână pentru a trage ușor de lobul urechii în jos. Astfel, canalul urechii se deschide și casca este introdusă cu ușurință.

Firul opțional de fixare ajută la fixarea sigură a căștii în ureche.


Pentru a poziționa firul de fixare:

▶ Îndoiți firul de fixare și poziționați-l cu atenție în baza cavității urechii (consultați imaginea).



Scoaterea unui instrument auditiv:

- Ridicați instrumentul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❶.
- Țineți tubul aproape de cască și trageți casca afară cu atenție ❷.

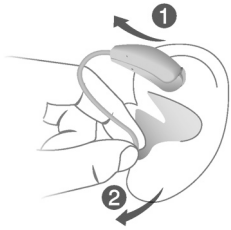

ATENȚIE

Risc de rănire!

- În cazuri foarte rare, componenta pentru ureche poate rămâne în urechea dumneavoastră atunci când scoateți instrumentul auditiv. Într-un astfel de caz, apelați la un medic pentru scoaterea componentei pentru ureche.

Curățați-vă și uscați-vă instrumentele auditive după utilizare. Citiți mai multe în secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Reglarea volumului

Instrumentele dumneavoastră auditive reglează automat volumul în funcție de situația de ascultare.

- Dacă preferați reglarea manuală a volumului, apăsați partea superioară a întrerupătorului rectangular pentru a mări volumul sau apăsați partea inferioară pentru a micșora volumul.

  Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular.

Un semnal opțional poate indica schimbarea volumului. După atingerea volumului maxim sau minim, puteți auzi un ton de semnal opțional.

Schimbarea programului auditiv

În funcție de situația de ascultare, instrumentele dumneavoastră auditive își reglează automat sunetul.

Instrumentele auditive pot avea, de asemenea, mai multe programe auditive care vă permit să schimbați sunetul, dacă este necesar. Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea programului.

- Pentru a schimba programul auditiv, apăsați scurt întrerupătorul rectangular.

  Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările întrerupătorului rectangular. Consultați secțiunea „Programe auditive” pentru o listă a programelor auditive.

Volumul implicit este aplicat.

Reglări suplimentare (opțional)

De asemenea, puteți utiliza comenzile instrumentului auditiv pentru a schimba alte funcții, de exemplu, nivelul semnalului de terapie tinitus.

Consultați secțiunea „Comenzi” pentru setările comenzilor.

Situații de ascultare speciale

La telefon

Când vorbiți la telefon, țineți receptorul telefonului ușor deasupra urechii. Instrumentul auditiv și receptorul telefonului trebuie să fie aliniate. Întoarceți ușor receptorul astfel încât urechea să nu fie complet acoperită.



Program telefonic

Puteți prefera un anumit volum când utilizați telefonul. Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program telefonic.

- Comutați la programul telefonic de fiecare dată când vorbiți la telefon.

  Secțiunea „Programe auditive” listează dacă un program telefonic este configurat pentru instrumentul dumneavoastră auditiv.

Flux de date (streaming) audio cu iPhone

Instrumentele dumneavoastră auditive sunt instrumente auditive **Made for iPhone**. Acest lucru înseamnă că puteți primi apeluri telefonice și asculta muzică de la iPhone direct în instrumentele auditive.

Pentru mai multe informații privind dispozitivele iOS compatibile, împerecherea, streamingul audio și alte funcții utile, contactați audiologul dumneavoastră.

Mod avion pentru instrumente auditive

Modul avion este activat atunci când Bluetooth instrumentelor auditive este dezactivat. În zone în care utilizarea tehnologiei Bluetooth nu este permisă (de exemplu, în unele avioane), puteți să dezactivați modul Bluetooth. Acesta lucru va dezactiva temporar Bluetooth în instrumentele dumneavoastră auditive. Instrumentele auditive vor funcționa și fără Bluetooth, însă redarea audio directă nu va fi posibilă, iar alte funcții nu vor fi disponibile.

- Pentru a activa sau pentru a dezactiva modul Bluetooth, utilizați aplicația pentru smartphone.

Un ton de alertă indică momentul în care modul Bluetooth este dezactivat sau activat.

Bucle de inducție audio

Unele telefoane și locuri publice precum teatre oferă semnal audio (muzică și vorbire) prin intermediul buclei de inducție audio. Cu acest sistem, instrumentele dumneavoastră auditive pot primi direct semnalul dorit – fără zgomotul din mediu.

De obicei, puteți recunoaște sistemele cu buclă de inducție audio după anumite simboluri.



De fiecare dată când vă aflați într-o locație cu buclă de inducție audio:

- Comutați la programul de telebobină.

  Dacă un program de telebobină este configurat pentru instrumentele dumneavoastră auditive, acesta este listat în secțiunea „Hearing programs" (Programe auditive).

Program de telebobină și telecomandă

NOTĂ

Pentru instrumente cu conectivitate wireless:

Când programul de telebobină este activ, telecomanda poate cauza un zgomot pulsator.

- Utilizați telecomanda la o distanță mai mare de 10 cm (4 inchi).

Întreținere și îngrijire

Pentru prevenirea deteriorărilor, este important să aveți grijă de instrumentele dumneavoastră și să respectați câteva reguli de bază, care vor deveni în curând parte a rutinei dumneavoastră zilnice.

Instrumente auditive

Curățarea

Instrumentele dumneavoastră auditive au un strat de protecție. Totuși, dacă acestea nu sunt curățate cu regularitate, se pot defecta sau pot cauza răniri personale.

- Curățați-vă instrumentele auditive zilnic folosind un șervețel moale și uscat.
- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți dispozitivele în apă.



- Nu aplicați niciodată presiune în timpul curățării.
- Nu utilizați solvenți pe bază de alcool pe contactele de încărcare.
- Pentru a evita coroziunea, utilizați un șervețel uscat moale pentru a șterge transpirația sau lichidele de pe contactele de încărcare sau instrumentele auditive înainte de a le introduce în încărcător.
- Solicitați audiologului dumneavoastră produse de curățare recomandate, seturi speciale de îngrijire sau informații suplimentare privind modul de păstrare a instrumentelor dumneavoastră auditive în bună stare.

Uscarea

Solicitați audiologului dumneavoastră produsele de uscare recomandate și instrucțiuni individuale privind momentul în care trebuie să uscați instrumentele auditive.

Depozitare

- Depozitare pe termen scurt (câteva zile): Opriți instrumentele auditive cu ajutorul întrerupătorului rectangular sau introduceți-le în încărcătorul alimentat.

  Încărcătorul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare. Dacă încărcătorul nu este conectat la sursa de alimentare și introduceți instrumentele auditive în încărcător, acestea **nu** sunt oprite.

  Țineți cont de faptul că atunci când opriți instrumentele auditive cu ajutorul unei telecomenzi sau aplicații de smartphone, instrumentele auditive **nu** sunt oprite complet. Acestea sunt în mod standby și vor continua să consume o cantitate mică de energie.

- Depozitare pe termen lung (săptămâni, luni, ...): Mai întâi, încărcați complet instrumentele auditive. Opriți-le cu ajutorul întrerupătorului rectangular înainte de a le depozita. Vă recomandăm să utilizați produse de uscare în timpul depozitării instrumentelor auditive.

  La intervale de 6 luni, va trebui să încărcați instrumentele auditive pentru a evita o descărcare-excesivă a bateriilor. Bateriile descărcate excesiv nu mai pot fi încărcate și acestea vor trebui înlocuite. Vă recomandăm o încărcare mai frecventă decât cea la intervale de 6 luni.

  Respectați condițiile de depozitare din secțiunea „Condiții de operare, transport și depozitare”.

Căști și tuburi

Cerumenul (ceara din urechi) se poate acumula pe căști. Acest lucru poate afecta calitatea sunetului.

- Pentru instrumente auditive cu un tub standard (ThinTube):

  Curățați căștile zilnic și curățați tuburile după cum este necesar.

  Schimbați căștile și tuburile aproximativ la fiecare trei - șase luni sau mai devreme dacă observați fisuri isau alte modificări.

- Pentru instrumente auditive cu dispozitiv de fixare în ureche:


  Curățați zilnic căștile.

  Solicitați audiologului dumneavoastră să curețe tuburile sau să schimbe căștile și tuburile după cum este necesar.

Curățarea căștilor

- Curățați casca după scoatere cu un tampon moale și uscat.

  Acest lucru va împiedica uscarea și întărirea cerumenului.

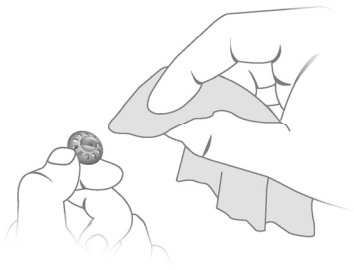


- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți casca în apă.

> **i** Încărcătorul opțional Charging+ Station utilizează lumina UV pentru curățare și usucă tuburile și căștile în timp ce încarcă instrumentele auditive.
>
> Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare privind cea mai bună soluție pentru dumneavoastră.

Schimbarea căștilor standard

- Scoateți casca utilizată și conectați noua cască.

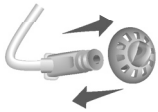

Schimbarea tuburilor standard

▶ Deșurubați tubul utilizat de la instrumentul auditiv.





▶ Înșurubați noul tub.

Întreținere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreținea și curățarea completă profesională a instrumentului.

Căștile și filtrele de ceară particularizate trebuie schimbate atunci când este necesar de către un audiolog.

Solicitați audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreținere, precum și asistență.

Informații importante privind siguranța

Această secțiune conține informații de siguranță importante privind bateria încorporată. Pentru mai multe informații, consultați manualul de siguranță furnizat cu instrumentele auditive.

AVERTISMENT

O baterie reîncărcabilă cu litiu-ion este permanent integrată în dispozitivul dumneavoastră. Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la explozia bateriei reîncărcabile cu litiu-ion.

Risc de rănire, incendiu sau explozie!

- Respectați instrucțiunile de siguranță pentru bateria reîncărcabilă cu litiu-ion din această secțiune.

AVERTISMENT

Risc de electrocutare!

- Conectați încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 60950-1 și/ sau IEC62368-1.

AVERTISMENT

- Respectați condițiile de operare.
- Acordați atenție specială pentru a proteja dispozitivul împotriva căldurii extreme (de ex. flacără deschisă, cuptoare cu microunde, cuptoare cu inducție sau alte câmpuri de înaltă inducție) și razele soarelui.
- Încărcați instrumentele auditive doar cu un încărcător aprobat. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- Nu dezasamblați dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul în atmosfere explozive.
- Nu utilizați dispozitive care sunt deformate sau au urme evidente de deteriorare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă observați că performanțele acestuia se reduc considerabil după încărcare. Returnați dispozitivul audiologului dumneavoastră.
- Nu eliminați dispozitivul în foc sau în apă.

AVERTISMENT

- Înlocuirea și repararea trebuie efectuate doar de către un profesionist. Așadar:
- Nu reparați sau înlocuiți dumneavoastră bateria reîncărcabilă cu litiu-ion.
- În cazul puțin probabil în care o baterie cu litiu-ion plesnește sau explodează, țineți toate materialele combustibile la distanță.

În oricare dintre cazurile de mai sus, returnați dispozitivele audiologului dumneavoastră.

Informații suplimentare

Informații privind siguranța

Pentru mai multe informații, consultați manualul de siguranță furnizat cu dispozitivul.

Accesorii

Puteți utiliza smartphone app pentru o comandă de la distanță convenabilă a instrumentelor dumneavoastră auditive. Această aplicație vă permite, de asemenea, să dezactivați tonuri de semnal pentru a crea profiluri de sunet individuale și multe alte funcții.

De asemenea, puteți utiliza o telecomandă.

Consultați audiologul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Condiții de operare, transport și depozitare

Instrumentele auditive funcționează în următoarele condiții de mediu (valabile, de asemenea, și între utilizări):

Condiții de operare	**Descărcarea**	**Încărcarea**
Temperatură	între 0 și 50 °C (între 32 și 122 °F)	între 10 și 35 °C (între 50 și 95 °F)
Umiditate relativă	între 5 și 93 %	între 20 și 75 %
Presiune atmosferică	între 700 și 1060 hPa	între 700 și 1060 hPa

În timpul perioadelor extinse de transport și depozitare, vă rugăm să țineți cont de următoarele condiții:

	Depozitare	**Transport**
Temperatură (recomandată)	între 10 și 25 °C (între 50 și 77 °F)	între -20 și 60 °C (între -4 și 140 °F)
Temperatură (domeniu maxim)	între 10 și 40 °C (între 50 și 104 °F)	între -20 și 60 °C (între -4 și 140 °F)
Umiditate relativă (recomandată)	între 20 și 80 %	între 5 și 90 %
Umiditate relativă (domeniu maxim)	între 10 și 80 %	între 5 și 90 %
Presiune atmosferică	între 700 și 1060 hPa	între 700 și 1060 hPa

Țineți cont de faptul că trebuie să încărcați instrumentele auditive cel puțin la fiecare 6 luni. Vă recomandăm să încărcați Instrumentele auditive la fiecare 3 luni. Pentru detalii, consultați secțiunea „Întreținere și îngrijire”.

Pentru alte componente, precum încărcătorul, se pot aplica alte condiții.

AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

- Expediați bateriile cu litiu și instrumentele auditive conform reglementărilor locale.

Informații privind eliminarea

- Pentru a evita poluarea mediului înconjurător, nu aruncați bateriile sau instrumentele auditive la gunoiul menajer.
- Reciclați sau eliminați bateriile sau instrumentele auditive conform reglementărilor locale.

Simboluri utilizate în acest document

⚠	Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.
!	Indică posibile daune materiale.
i	Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.

Made for iPhone | iPad | iPod „Made for iPod”, „Made for iPhone” și „Made for iPad” denotă faptul că un accesoriu electronic a fost conceput special pentru conectare la iPod, iPhone sau iPad și a fost certificat de către dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și reglementare. Vă rugăm să țineți cont de faptul că utilizarea acestui accesoriu cu un iPhone, iPad, sau iPod poate afecta performanțele wireless.

Identificarea și soluționarea problemelor

Problema și posibilele soluții
Sunetul este slab.
• Măriți volumul. • Încărcați instrumentul auditiv. • Curățați sau înlocuiți casca.
Instrumentul auditiv emite un sunet fluierat.
• Reintroduceți casca până la fixarea sigură a acesteia. • Micșorați volumul. • Curățați sau înlocuiți casca.
Sunetul este distorsionat.
• Micșorați volumul. • Încărcați instrumentul auditiv. • Curățați sau înlocuiți casca.
Instrumentul auditiv emite tonuri de semnal.
• Încărcați instrumentul auditiv.
Instrumentul auditiv nu funcționează.
• Porniți instrumentul auditiv. • Încărcați instrumentul auditiv. De asemenea, urmăriți ledurile de stare de pe încărcător.
Consultați tehnicianul acustician audioprotector dacă întâmpinați alte probleme.

Informații specifice fiecărei țări

SUA și Canada

Informații de certificare pentru instrumente auditive cu funcționalitate wireless (fără fir):

P Li-Ion G6

- HVIN: RFM002
- Conține FCC ID: SGI-RFM002
- Conține IC: 267AB-RFM002

Service și garanție

Numere de serie

Stânga:

Dreapta:

Date de service

1:	4:
2:	5:
3:	6:

Garanție

Data achiziționării:

Perioadă de garanție în luni:

Audiologul dumneavoastră

Producător Legal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemarca

Document No. 04493-99T02-3B00 RO
Order/Item No. 109 998 37
Master Rev02, 04.2022
© 05.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.audioservice.com