SR Li 8

Ghid de utilizare

Made for iPhone | iPad

Audio Service

Cuprins

Bine ați venit **4**

Aparatele dumneavoastră auditive **5**

Tip de aparat auditiv 5

Familiarizarea cu aparatele dumneavoastră auditive 6

Componente și nume 7

Programe auditive 8

Funcții 8

Utilizare zilnică **9**

Încărcarea 9

Indicator de putere scăzută 10

Pornirea și oprirea aparatelor auditive 10

Comutarea la modul standby 11

Inserarea și detașarea aparatelor auditive 12

Reglarea volumului 17

Schimbarea programului auditiv 18

Situații de ascultare speciale **19**
La telefon 19
Flux de date (streaming) audio cu iPhone 20
Flux de date (streaming) audio cu telefon Android 20
Bluetooth 21
Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth cu aparatele dumneavoastră auditive 21

Întreținere și îngrijire **22**
Aparate auditive 22
Căști 24
Întreținere profesională 26

Informații importante privind siguranța **27**

Informații suplimentare **30**
Accesorii 30
Condiții de operare, transport și depozitare 30
Informații privind eliminarea 32
Explicarea simbolurilor 32
Depanarea aparatelor auditive 34
Informații specifice fiecărei țări 35
Service și garanție 39

Bine ați venit

Vă mulțumim pentru alegerea instrumentelor noastre auditive, care vă vor însoți în viața de zi cu zi. Ca în cazul oricărui lucru nou, va fi necesar un anumit interval de timp să vă familiarizați cu acestea.

Acest ghid, împreună cu asistența oferită de audiologul dumneavoastră, vă va ajuta să înțelegeți avantajele și calitatea mult mai bună a vieții oferite de instrumentele dumneavoastră auditive.

Pentru a beneficia cât mai mult de instrumentele dumneavoastră auditive, se recomandă să le purtați zilnic, pe parcursul întregii zile. Acest ghid vă va ajuta să vă obișnuiți cu acestea.

ATENŢIE
Este important să citiți ghidul de utilizare și manualul de siguranță cu atenție și în întregime. Respectați informațiile de siguranță pentru a evita daunele sau rănirea.

Înainte de prima utilizare a aparatelor auditive, încărcați-le complet.

Este posibil ca dispozitivul să nu arate exact ca ilustraţiile orientative din aceste instrucţiuni. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări pe care le considerăm necesare.

Aparatele dumneavoastră auditive

Acest ghid de utilizare descrie funcțiile opționale pe care aparatele dumneavoastră auditive le pot avea sau nu.

Solicitați audiologului să indice funcțiile valide pentru aparatele dumneavoastră auditive.

Tip de aparat auditiv

Aparatele dumneavoastră auditive sunt model RIC (Receiver-in-Canal - Receptor în canal). Receptorul este amplasat în canalul urechii și este conectat la aparatul auditiv printr-un cablu receptor. Aparatele auditive nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani sau persoanelor cu o vârstă de dezvoltare sub 3 ani.

Aparatele dvs. auditive dispun de Bluetooth® Low Energy* tehnologie care permite schimbul de date ușor cu smartphone-ul dumneavoastră și pentru redarea audio fluentă cu iPhone-ul dumneavoastră** și pentru unele smartphone-uri Android care acceptă Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) sau Bluetooth LE Audio*.

O baterie (baterie reîncărcabilă cu litiu-ion) este permanent integrată în aparatul auditiv. Acest lucru permite încărcarea ușoară cu Connexx Slim-RIC Travel Charger 2 sau Connexx Charging+ Station SR.

* Marca Bluetooth și logo-urile sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către WS Audiology Denmark A/S se face sub licență. Alte mărci comerciale și mărci înregistrate aparțin deținătorilor respectivi.

** iPad®, iPad Air®, iPad Pro® și iPhone® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni.


Funcționalitatea wireless permite funcții audiologice avansate și sincronizare între cele două aparate auditive.

Familiarizarea cu aparatele dumneavoastră auditive

Aparatele dumneavoastră auditive nu dispun de comenzi.

Dacă doriți să reglați volumul sau să comutați programele auditive manual, puteți solicita audiologului dumneavoastră o telecomandă opțională.

Componente şi nume

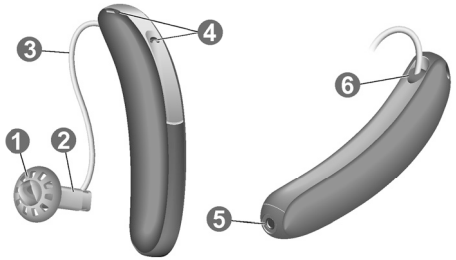

❶ Cască	❹ Orificii pentru microfon
❷ Receptor	❺ Contact de încărcare
❸ Cablu receptor	❻ Indicator lateral (roşu = urechea dreaptă, albastru = urechea stângă)

Puteţi utiliza următoarele căşti standard:

Căşti standard		Dimensiune
☐		Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power
☐		Eartip 3.0 Open
☐		Eartip 3.0 Tulip

Puteţi schimba cu uşurinţă căştile standard. Citiţi mai multe în secţiunea „Întreţinere şi îngrijire”.

Programe auditive

1
2
3
4
5
6

Citiţi mai multe în secţiunea „Schimbarea programului auditiv”.

Funcţii

☐ **Funcția de pornire cu întârziere** permite introducerea fără țiuit a aparatelor auditive.


Citiți mai multe în secțiunea „Pornire și oprire”.

☐ **Funcția de tinitus** generează un sunet pentru a vă distrage atenția de la tinitusul dumneavoastră.

Utilizare zilnică

Încărcarea

Aveți posibilitatea de a alege între Connexx Slim-RIC Travel Charger 2 ❶ și Connexx Charging+ Station SR ❷.

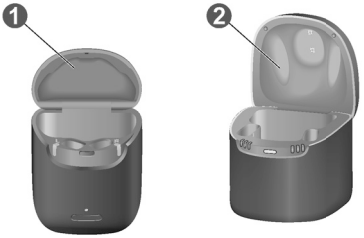

- Amplasați aparatele auditive în încărcător.
- Urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare a încărcătorului. De asemenea, puteți găsi sfaturi utile privind încărcarea în ghidul de utilizare a încărcătorului.

Indicator de putere scăzută

Veți auzi un semnal de alarmă care indică faptul că bateria este aproape consumată. Semnalul se va repeta la fiecare 15 până la 30 de minute, în funcție de setările dumneavoastră. În funcție de utilizarea aparatelor auditive, aveți aproximativ 1,5 ore pentru a încărca aparatele auditive. Cu puțin timp înainte ca aparatele auditive să se oprească, semnalul de alarmă se va repeta la fiecare 1 până la 7 minute, în funcție de setările dumneavoastră.

Rețineți că durata de funcționare a acumulatorului este redusă dacă sunt utilizate simultan prea multe caracteristici.

Pornirea și oprirea aparatelor auditive

Porniți și opriți aparatele auditive urmând pașii de mai jos.

Prin intermediul încărcătorului:

- Pentru a porni aparatele auditive, scoateți-le din încărcător.

  Melodia de pornire este redată în aparatul auditiv. Sunt setate volumul și programul auditiv **implicite**.

- Pentru a opri aparatele auditive, puneți-le în încărcător.

Rețineți că încărcătorul trebuie să fie pornit.

Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare a încărcătorului.

Comutarea la modul standby

Prin intermediul telecomenzii, puteți comuta aparatele auditive în modul standby. Astfel, acestea vor fi dezactivate. Când ieșiți din modul standby, sunt setate programul auditiv și volumul utilizate **anterior**.

Notă:

- În modul standby, instrumentele auditive nu sunt oprite complet. Acestea vor continua să consume o anumită cantitate de energie.

  Drept urmare, recomandăm utilizarea modului standby doar pentru o scurtă perioadă de timp.

- Dacă doriți să părăsiți modul standby, dar telecomanda nu este la îndemână: Opriți și reporniți aparatele auditive din nou (amplasându-le scurt în încărcător până când unul sau mai multe leduri se aprind). Așteptați până când melodia de pornire este redată în aparatele auditive. Aceasta poate dura câteva secunde. Rețineți că volumul și programul auditiv implicite sunt setate.

Inserarea și detașarea aparatelor auditive

Aparatele dumneavoastră auditive au fost reglate cu precizie pentru urechea dreaptă și urechea stângă. Marcatoarele colorate indică partea:




- marcator roșu = urechea dreaptă
- marcator albastru = urechea stângă

Introducerea unui aparat auditiv:

▶ Pentru Sleeves, asigurați-vă că pliul Sleeve este aliniat cu pliul cablului receptorului.

Corect:

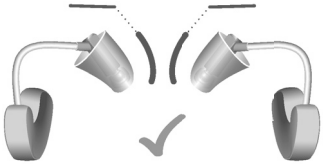


Incorect:



▶ Țineți cablul receptor de partea îndoită mai apropiată de cască.

- Împingeți cu grijă casca în canalul urechii ❶.
- Răsuciți-l ușor până când se fixează bine.

  Deschideți și închideți gura pentru a evita acumularea de aer în canalul urechii.
- Ridicați aparatul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❷.

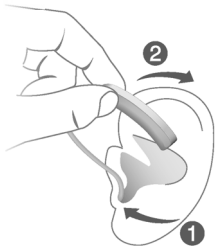

ATENŢIE

Pericol de rănire!

- Purtați întotdeauna cablul de receptor cu o componentă pentru ureche.
- Asigurați-vă că ați atașat complet casca.

ATENŢIE

Pericol de rănire!

- Introduceți componenta pentru ureche cu atenție și nu prea adânc în ureche.

- Poate fi util să introduceți aparatul auditiv din dreapta cu mâna dreaptă și aparatul auditiv din stânga cu mâna stângă.
- Dacă aveți probleme la introducerea căștii, utilizați cealaltă mână pentru a trage ușor de lobul urechii în jos. Astfel, canalul urechii se deschide și casca este introdusă cu ușurință.

Firul opțional de fixare ajută la fixarea sigură a căștii în ureche. Pentru a atașa fluxul opțional de fixare:

Concha Lock Sleeve 3.0

- Aliniați Concha Lock Sleeve 3.0 cu receptorul, așa cum este indicat în imagine. Apoi glisați Concha Lock Sleeve 3.0 peste receptor, astfel încât să se fixeze bine.



Concha Lock 3.0

- Aliniați capătul fluxului de fixare cu capătul plat al receptorului.



- Apoi apăsați pe fluxul de fixare către receptor până se fixează, moment în care se aude un clic.




Pentru a poziționa firul de fixare:

- Îndoiți firul de fixare şi poziționați-l cu atenție în baza cavității urechii (consultați imaginea).



Îndepărtarea unui aparat auditiv:

- Ridicați aparatul auditiv și glisați-l peste partea de sus a urechii ❶.

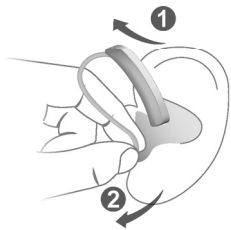

- Apucați receptorul din canalul urechii cu două degete şi scoateți-l cu grijă ❷.

  Nu trageți de cablul receptor.

ATENŢIE

Pericol de rănire!

- În cazuri foarte rare, componenta pentru ureche poate rămâne în urechea dumneavoastră atunci când scoateți aparatul auditiv. Într-un astfel de caz, apelați la un medic pentru scoaterea căștii.

Curățați și uscați aparatele auditive după utilizare. Citiți mai multe în secţiunea „Întreţinere și îngrijire”.

Reglarea volumului

Aparatele dumneavoastră auditive reglează automat volumul în funcție de situația de ascultare.

- Dacă preferaţi reglarea manuală a volumului, folosiţi o telecomandă opţională.

Un semnal opţional poate indica schimbarea volumului.

Schimbarea programului auditiv

În funcție de situația de ascultare, aparatele dumneavoastră auditive își reglează automat sunetul.

Aparatele auditive pot avea, de asemenea, mai multe programe auditive care vă permit să schimbați sunetul, dacă este necesar. Un ton de semnal opțional poate indica schimbarea programului.

- Pentru a schimba manual programul auditiv, folosiţi o telecomandă opţională.

  Consultaţi secţiunea „Programe auditive” pentru o listă a programelor auditive.

Volumul implicit este aplicat.

Situaţii de ascultare speciale

La telefon

Când vorbiți la telefon, țineți receptorul telefonului ușor deasupra urechii. Aparatul auditiv și receptorul telefonului trebuie să fie aliniate. Întoarceți ușor receptorul astfel încât urechea să nu fie complet acoperită.



Program telefonic

Puteți prefera un anumit volum când utilizați telefonul. Solicitați audiologului dumneavoastră să configureze un program telefonic.

- Comutați la programul telefonic de fiecare dată când vorbiți la telefon.

  Secțiunea „Programe auditive” listează dacă un program telefonic este configurat pentru aparatele dumneavoastră auditive.

Flux de date (streaming) audio cu iPhone

Aparatele dvs. auditive sunt aparate auditive Made for iPhone. Acest lucru înseamnă că puteți primi apeluri telefonice și asculta muzică de la iPhone direct în aparatele auditive.

În plus, aparatele dumneavoastră auditive pot permite efectuarea de apeluri hands-free cu dispozitive iPhone și iPad compatibile.

Pentru mai multe informații privind dispozitivele iOS compatibile, asocierea, streamingul audio și alte funcții utile, contactați audiologul dumneavoastră.

Flux de date (streaming) audio cu telefon Android

Dacă telefonul dvs. mobil acceptă Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), puteți primi apeluri telefonice și puteți asculta muzică de pe telefonul mobil direct în aparatele auditive.

Pentru mai multe informații privind dispozitivele Android compatibile, asocierea, streamingul audio și alte funcții utile, contactați audiologul dumneavoastră.

Bluetooth

Aparatele dumneavoastră auditive se pot conecta cu dispozitive compatibile Bluetooth®, cum ar fi telefoane, tablete și computere. Acest lucru vă permite să vă folosiți aparatele auditive pentru apeluri telefonice, pentru a asculta podcast-uri și muzică și așa mai departe.

În anumite situații, cum ar fi călătoria cu avionul, utilizarea dispozitivelor Bluetooth ar putea fi interzisă. În acest caz, funcționalitatea aparatului dvs. auditiv Bluetooth poate fi dezactivată din aplicația pentru smartphone.

Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth cu aparatele dumneavoastră auditive

Procedura de împerechere Bluetooth depinde de dispozitivul dumneavoastră Bluetooth. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați instrucțiunile dispozitivului dumneavoastră.

După ce vă porniți aparatele auditive, trebuie să finalizați împerecherea în termen de 3 minute. Dacă împerecherea durează mai mult de 3 minute, opriți pur și simplu aparatele auditive, așteptați 2 secunde, apoi porniți-le din nou. Apoi reîncepeți procedura de împerechere pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth .

Întreținere și îngrijire

Pentru prevenirea deteriorărilor, este important să aveți grijă de aparatele dumneavoastră și să respectați câteva reguli de bază, care vor deveni în curând parte a rutinei dumneavoastră zilnice.

Aparate auditive

Curățarea

Aparatele dumneavoastră auditive au un înveliș protector. Cu toate acestea, dacă acestea nu sunt curățate cu regularitate, se pot defecta sau pot cauza răniri personale.

- Curățați-vă aparatele auditive zilnic folosind un șervețel moale și uscat.
- Nu utilizați niciodată jet de apă sau nu introduceți dispozitivele în apă.



- Nu aplicați niciodată presiune în timpul curățării.
- Nu utilizați solvenți pe bază de alcool pe contactele de încărcare.
- Pentru a evita coroziunea, utilizați un șervețel uscat moale pentru a șterge transpirația sau lichidele de pe contactele de încărcare sau aparatele auditive înainte de a le introduce în încărcător.

▶ Solicitați audiologului dumneavoastră produse de curățare recomandate, seturi speciale de îngrijire sau informații suplimentare privind modul de păstrare a aparatelor dumneavoastră auditive în bună stare.

Uscarea

Utilizați produse convenționale pentru a usca aparatele auditive sau Connexx Charging+ Station SR. Solicitați audiologului dumneavoastră produsele de uscare recomandate și instrucțiuni individuale privind momentul în care trebuie să uscați aparatele auditive.

Depozitare

- Depozitare pe termen scurt (câteva zile): Opriți instrumentele auditive amplasându-le în încărcător.

  Încărcătorul trebuie să fie pornit. Dacă încărcătorul nu este pornit și așezați instrumentele auditive în încărcător, instrumentele auditive **nu** sunt oprite.

  Țineți cont de faptul că atunci când opriți instrumentele auditive cu ajutorul unei telecomenzi sau aplicații de smartphone, instrumentele auditive **nu** sunt oprite complet. Acestea sunt în mod standby și vor continua să consume o cantitate mică de energie.

- Depozitare pe termen lung (săptămâni, luni, ...): Mai întâi, încărcați complet instrumentele auditive. Lăsați-le în Connexx Slim-RIC Travel Charger 2 cu capacul închis. Odată ce instrumentele auditive sunt complet încărcate, încărcătorul și instrumentele auditive intră în modul hibernare pentru a economisi energie.

Vă recomandăm să utilizați produse de uscare în timpul depozitării instrumentelor auditive.

La intervale de 6 luni, va trebui să încărcați instrumentele auditive pentru a evita o descărcare-excesivă a bateriilor. Bateriile descărcate excesiv nu mai pot fi încărcate și acestea vor trebui înlocuite. Vă recomandăm o încărcare mai frecventă decât cea la intervale de 6 luni.

Respectați condițiile de depozitare din secțiunea „Condiții de operare, transport și depozitare”.

Căşti


Curăţarea

Cerumenul (ceara din urechi) se poate acumula pe căşti. Acest lucru poate afecta calitatea sunetului. Curăţaţi zilnic căştile.

Pentru toate tipurile de căşti:

- Curăţaţi casca imediat după scoatere cu un tampon moale şi uscat.

  Acest lucru va împiedica uscarea şi întărirea cerumenului.

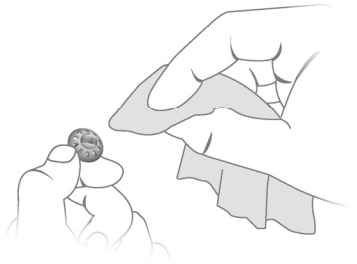


Schimbarea

Schimbaţi căştile standard aproximativ la fiecare trei luni. Înlocuiţi-le mai repede dacă observaţi fisuri sau alte modificări. Procedura pentru schimbarea căştilor standard depinde de tipul de cască. În secţiunea „Componente şi nume”, audiologul dumneavoastră a marcat tipul de cască.

- Pentru a îndepărta vechile dopuri pentru căști sau Sleeve, urmați ilustrația de mai jos. Acordați atenție pentru a nu trage de cablul receptor.



- Aveți grijă în special ca dopuri pentru căști sau Sleeve să acopere complet inelele de reținere ale receptorului.
- Verificați montarea fermă a noului dop pentru căști Sleeve.

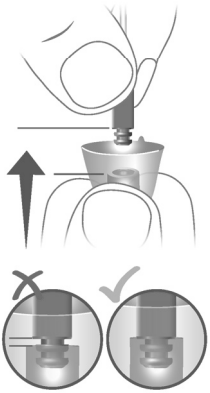

Întreţinere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreţinea şi curăţarea completă profesională a instrumentului.

Solicitaţi audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreţinere, precum şi asistenţă.

Informații importante privind siguranța

Această secțiune conține informații de siguranță importante privind bateria încorporată. Pentru mai multe informații privind siguranța, consultați manualul de siguranță furnizat cu aparatele auditive.

AVERTISMENT

O baterie reîncărcabilă cu litiu-ion este permanent integrată în dispozitivul dumneavoastră. Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la explozia bateriei reîncărcabile cu litiu-ion.

Risc de rănire, incendiu sau explozie!

- Respectaţi instrucţiunile de siguranţă pentru bateria reîncărcabilă cu litiu-ion din această secţiune.

AVERTISMENT

Risc de electrocutare!

- Conectați încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 62368-1.

AVERTISMENT

- Respectați condițiile de operare.
- Acordați atenție specială pentru a proteja dispozitivul împotriva căldurii extreme (de ex. flacără deschisă, cuptoare cu microunde, cuptoare cu inducție sau alte câmpuri de înaltă inducție) și razele soarelui.
- Încărcați aparatele auditive doar cu un încărcător aprobat. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- Nu dezasamblați dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul în atmosfere explozive.
- Nu utilizați dispozitive care sunt deformate sau au urme evidente de deteriorare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă observați că performanțele acestuia se reduc considerabil după încărcare. Returnați dispozitivul audiologului dumneavoastră.
- Nu eliminați dispozitivul în foc sau în apă.

AVERTISMENT

Înlocuirea și repararea trebuie efectuate doar de către un profesionist. Așadar:

- Nu reparați sau înlocuiți dumneavoastră bateria reîncărcabilă cu litiu-ion.
- În cazul puțin probabil în care o baterie cu litiu-ion plesnește sau explodează, țineți toate materialele combustibile la distanță.

În oricare dintre cazurile de mai sus, returnați dispozitivele audiologului dumneavoastră.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de siguranţă furnizat cu dispozitivul.

Informaţii suplimentare

Accesorii

Tipul accesoriilor disponibile depinde de tipul aparatului auditiv. De exemplu: o telecomandă, un dispozitiv de flux de date (streaming) audio sau o aplicație de smartphone pentru telecomandă.

Consultați audiologul pentru informații suplimentare.

Condiţii de operare, transport şi depozitare

Dispozitivul funcţionează în următoarele condiţii de mediu (valabile, de asemenea, şi între utilizări):

Condiţii de operare	Descărcarea	Încărcarea
Temperatură	0-50 °C 32-122 °F	10-35 °C 50-95 °F
Umiditate relativă	5-93%	20-75%
Presiune atmosferică	700- 1060 hPa	700- 1060 hPa

În timpul perioadelor prelungite de transport şi depozitare, vă rugăm să respectaţi următoarele condiţii:

	Depozitare	**Transport**
Temperatură (recomandată)	10-25 °C 50-77 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Temperatură (domeniu maxim)	10-40 °C 50-104 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Umiditate relativă (recomandată)	20-80%	5-90%
Umiditate relativă (domeniu maxim)	10-80%	5-90%
Presiune atmosferică	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Ţineţi cont de faptul că trebuie să încărcaţi dispozitivul cel puţin la fiecare 6 luni. Vă recomandăm să încărcaţi dispozitivul la fiecare 3 luni. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Întreţinere şi îngrijire”.

Pentru alte componente, precum încărcătorul, se pot aplica alte condiţii.

AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

- Expediați bateriile cu litiu și aparatele auditive conform reglementărilor locale.


Informații privind eliminarea

- Pentru a evita poluarea mediului înconjurător, nu aruncați bateriile sau instrumentele auditive la gunoiul menajer.
- Reciclați sau eliminați bateriile sau instrumentele auditive conform reglementărilor locale.

Explicarea simbolurilor

Simboluri utilizate în ghidurile noastre de utilizare

	Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.
	Indică posibile daune materiale.
	Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.
	Întrebări puse frecvent
	Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene, consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.
	Indică producătorul legal al dispozitivului.

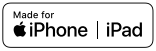

Utilizarea simbolului „Made for Apple” denotă faptul că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) în simbol şi a fost certificat de către dezvoltator ca îndeplinind standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și reglementare.

Depanarea aparatelor auditive

Problema și posibilele soluții

Sunetul este slab.

- Măriți volumul.
- Încărcați aparatul auditiv.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Aparatul auditiv emite sunete fluierate.

- Reintroduceți casca până la fixarea sigură a acesteia.
- Micșorați volumul.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Sunetul este distorsionat.

- Micșorați volumul.
- Încărcați aparatul auditiv.
- Curățați sau înlocuiți casca.

Aparatul auditiv emite tonuri de semnal.

- Încărcați aparatul auditiv.

Aparatul auditiv nu funcționează.

- Porniți aparatul auditiv.
- Încărcați aparatul auditiv. De asemenea, urmăriți ledurile de stare de pe încărcător.

Consultați tehnicianul acustician audioprotector dacă întâmpinați alte probleme.

Informaţii specifice fiecărei ţări

SUA şi Canada

Informații de certificare pentru aparatele auditive cu funcționalitate wireless:

SR Li 8:

- HVIN: RFM004
- Conţine FCC ID: 2AXDT-RFM004
- Conţine ID IC: 26428-RFM004

Service și garanție

Numere de serie	Aparat auditiv	Unitatea receptorului
Stânga:		
Dreapta:		

Date de service

1:	4:
2:	5:
3:	6:

Garanție

Data achiziționării:

Perioadă de garanție în luni:

Audiologul dumneavoastră

Producător Legal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemarca

Document No. 05811-99T01-3B00 RO
Order/Item No. 210 433 36
Master Rev01, 06.2024
www.wsaud.com
© 09.2024, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.audioservice.com