
connexx

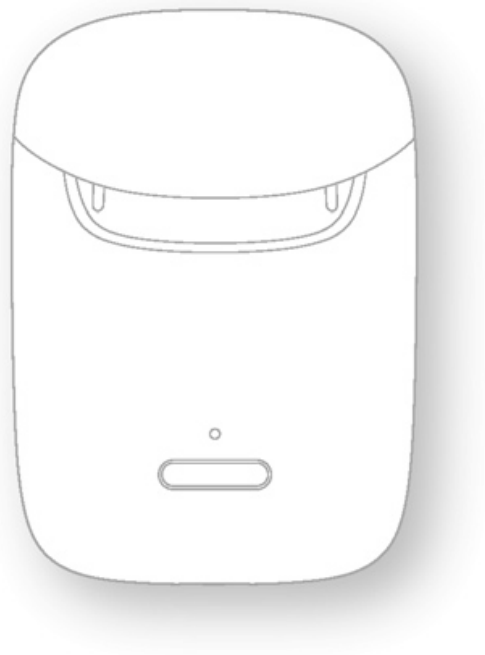

Slim-RIC Travel Charger 2

Ghid de utilizare

Cuprins

Înainte de a începe 4

Utilizare zilnică 8

- Încărcarea 8
- Încărcarea bateriei interne a încărcătorului 20
- Verificarea capacității bateriei încărcătorului 27

Întrebări puse frecvent 30

Întreținere și îngrijire 34

- Curățarea 34
- Întreținere profesională 35

Informații importante privind siguranța 36
Informații privind siguranța pentru bateriile reîncărcabile cu litiu-ion 36
Informații privind siguranța pentru încărcător 41
Informații suplimentare 49
Condiții de operare, transport și depozitare 49
Date tehnice privind sursa de alimentare 51
Informații privind eliminarea 52
Explicarea simbolurilor 53
Depanarea pentru încărcător 58
Informații importante 62
Informații privind conformitatea pentru încărcător 62
Informații specifice fiecărei țări 64

Înainte de a începe

Acest dispozitiv este destinat încărcării aparatelor noastre auditive specifice cu baterii încorporate (baterii reîncărcabile litiu-ion). Audiologul dumneavoastră vă va oferi informații în privința modelelor compatibile.


Încărcătorul este destinat exclusiv utilizării în interior. Respectați și urmați condițiile de operare din secțiunea „Condiții de operare, transport și depozitare”.

Încărcătorul nu este destinat să fie utilizat ca mijloc de depozitare pentru transportul aparatelor auditive.

ATENŢIE

Citiţi în întregime acest ghid de utilizare şi urmaţi informaţiile de siguranţă din acest document pentru a evita deteriorările sau rănile.

Este posibil ca dispozitivul să nu arate exact ca ilustraţiile orientative din aceste instrucţiuni. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări pe care le considerăm necesare.

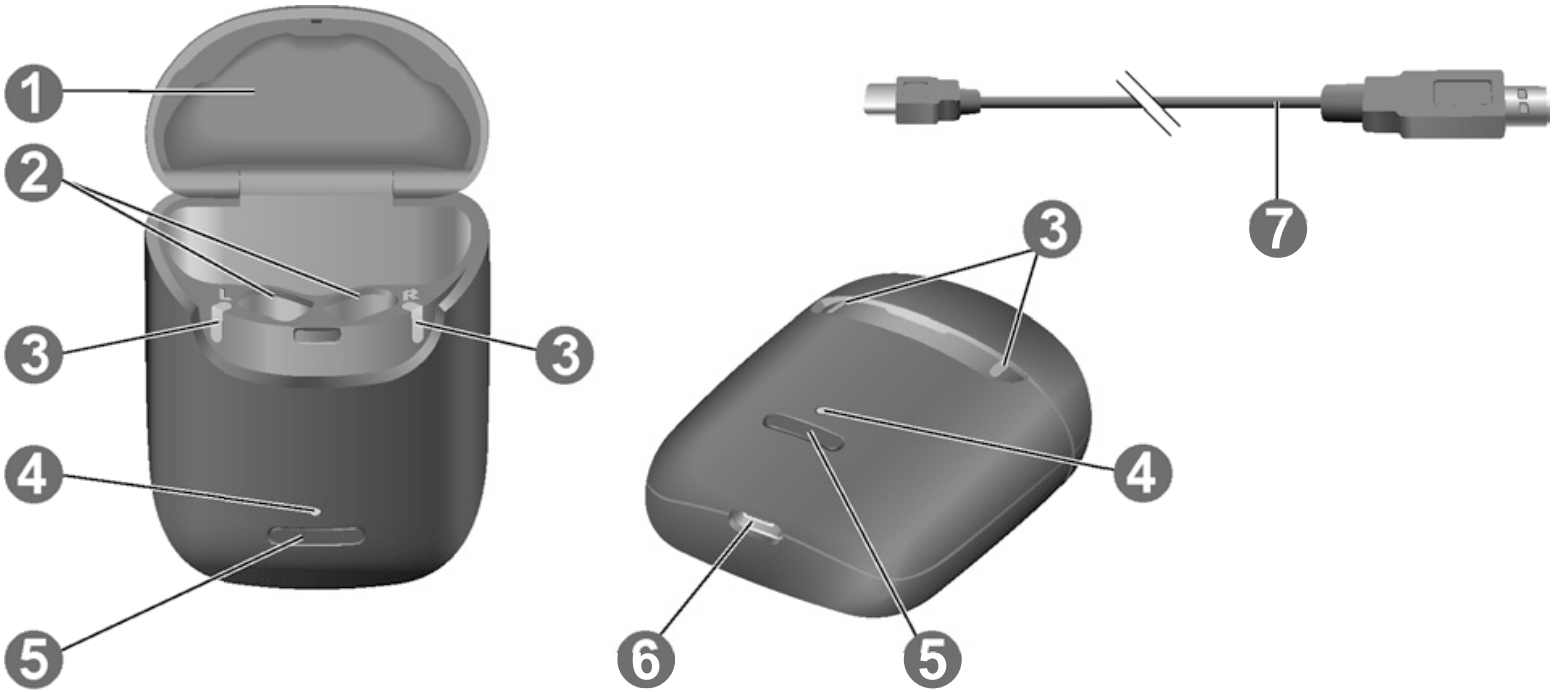

1
2
3
3
4
5
L
R
7
3
4
6
5

1. Capac
2. Sloturi de încărcare
3. Instrumente auditive cu LED-uri care indică statusul
4. Încărcător cu LED-uri de stare
5. Buton
6. Port USB pentru sursa de alimentare
7. Cablu de alimentare USB

Utilizare zilnică

Încărcarea


În plus Slim-RIC Travel Charger 2 ❶, oferim Charging+ Station SR ❷. Pentru informaţii suplimentare despre acest încărcător, vă rugăm să contactaţi audiologul dumneavoastră şi să urmaţi instrucţiunile din ghidul de utilizare.

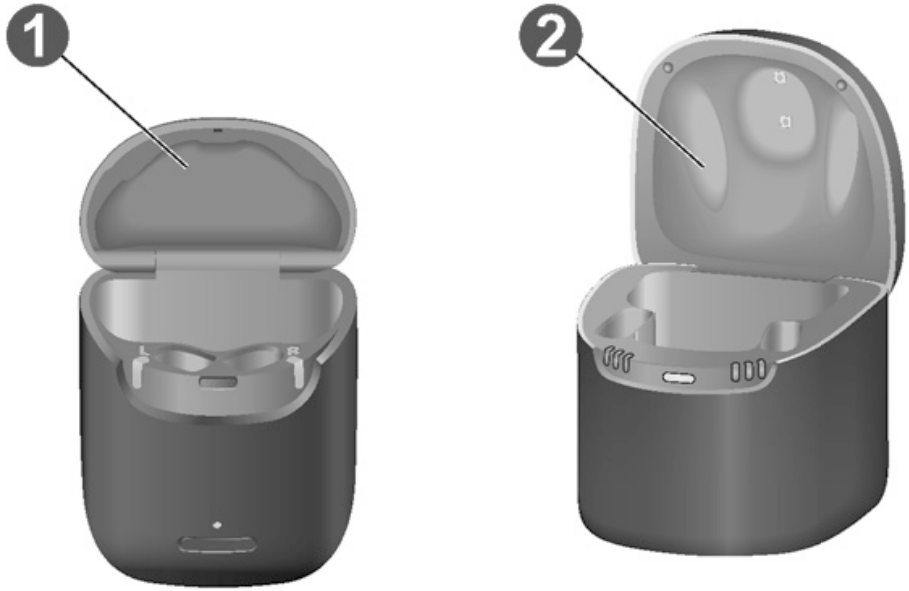
1
2

Cum puteţi utiliza încărcătorul

Puteţi utiliza încărcătorul în trei moduri diferite.

Încărcare de la priza electrică

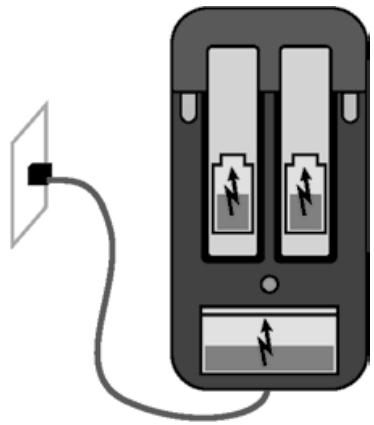


Când încărcătorul este conectat sau plasat pe un încărcător wireless, acesta încarcă aparatele auditive (dacă sunt plasate în încărcător) şi încarcă bateria integrată în acelaşi timp.

Atât timp cât încărcătorul este încărcat de o sursă de alimentare externă, LED-ul încărcătorului arată starea de încărcare a bateriei integrate, iar LED-urile pentru instrumentele auditive arată starea instrumentelor auditive.

Pentru economisirea energiei după încărcarea wireless, LED-urile se vor opri după ce încărcătorul şi instrumentele auditive sunt complet încărcate.


Încărcare mobilă

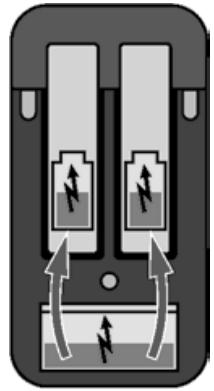

Când nu aveţi la dispoziţie o priză electrică, puteţi încărca totuşi instrumentele auditive. Energia este furnizată de bateria integrată a încărcătorului la instrumentele auditive. Încărcătorul trebuie să fie pornit pentru a face acest lucru.

Starea de încărcare a încărcătorului şi instrumentelor auditive este afişată apăsând butonul sau deschizând capacul.

Păstrarea în siguranţă

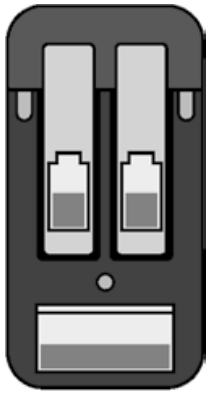

Când încărcarea instrumentelor auditive este finalizată, depozitaţi instrumentele auditive în siguranţă în interiorul încărcătorului, având capacul închis.

În cazul în care doriţi să depozitaţi instrumentele auditive pentru o perioadă mai lungă de timp, aveţi posibilitatea să opriţi încărcătorul. Încărcătorul poate fi oprit numai atunci când nu există nicio sursă de alimentare conectată la încărcător.


Pornirea sau oprirea încărcătorului

Când încărcătorul este conectat la o priză electrică, acesta este pornit automat şi nu poate fi oprit.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton timp de 5 secunde pentru a porni sau opri încărcătorul, atunci când efectuaţi încărcarea mobilă.

- Când încărcătorul porneşte, starea instrumentelor auditive şi starea bateriei interne a încărcătorului sunt afişate timp de 7 secunde.
- Când încărcătorul se opreşte, LED-ul frontal se aprinde verde şi se estompează pe o perioadă de aproximativ 7 secunde. Oprirea este completă după aproximativ 7 secunde.

Încărcarea instrumentelor auditive

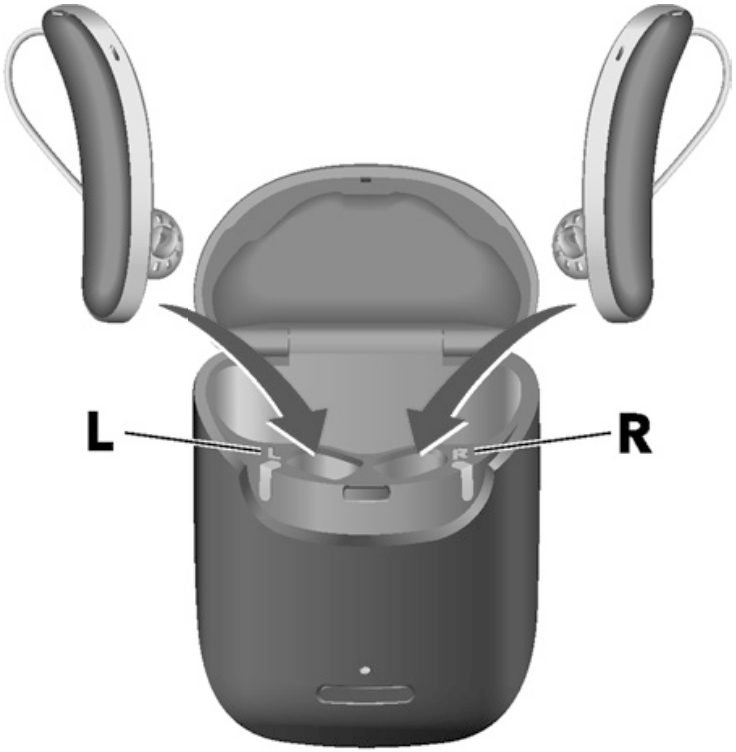

- Amplasaţi instrumentul auditiv pentru partea dreaptă în slotul de încărcare marcat cu un „R” (dreapta) şi instrumentul auditiv pentru partea stângă în slotul de încărcare marcat cu un „L”.
- Aranjaţi căştile în mod corespunzător.
- Închideţi capacul încărcătorului din motive de economisire a bateriei.

- Instrumentele auditive sunt oprite automat şi încep să se încarce. Starea de încărcare este afişată timp de 7 secunde.

Dacă ledurile de stare nu luminează când introduceţi instrumentele auditive, verificaţi următoarele:

- Instrumentele auditive nu sunt amplasate corect. Apăsaţi-le uşor în sloturile de încărcare sau închideţi capacul încărcătorului.
- Încărcătorul este oprit. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul.


- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată pentru o încărcare mobilă. Conectaţi încărcătorul la o priză electrică.



NOTĂ

Dacă aşezaţi un instrument auditiv în slotul de încărcare greşit, cablul receptorului se poate deteriora la închiderea capacului încărcătorului.

Starea de încărcare a instrumentelor auditive

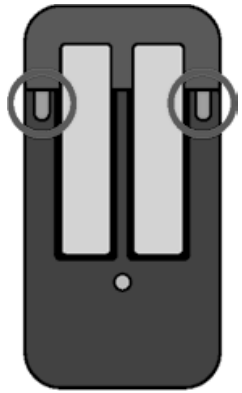

Ledul de lângă instrumentul auditiv indică starea de încărcare a instrumentului auditiv. Reţineţi că starea este afişată doar imediat după ce introduceţi instrumentele auditive în încărcător sau când apăsaţi scurt butonul sau când deschideţi capacul. Când încărcătorul este oprit, nu se afişează nicio stare.

Descriere stare LED-uri
Verde intermitent Instrumentul auditiv este încărcat.
Verde Instrumentul auditiv este complet încărcat.

Descriere stare LED-uri
LED-ul este stins Niciun instrument auditiv nu se află în încărcător, instrumentul auditiv nu este aşezat corect sau încărcătorul este oprit.
Portocaliu intermitent Fază de răcire. Încărcarea este reluată când dispozitivul s-a răcit. Consultaţi secţiunea „Depanarea problemelor”.
Roşu intermitent Eroare instrument auditiv. Consultaţi secţiunea „Depanarea problemelor”.

Indicaţie de putere scăzută a instrumentelor auditive

Veţi auzi un semnal de alarmă care indică faptul că bateria este aproape consumată. Semnalul va fi repetat la fiecare 20 minute. În funcţie de utilizarea instrumentelor auditive, aveţi aproximativ 1,5 ore pentru a încărca instrumentele auditive înainte ca acestea să se oprească.

Încărcarea bateriei interne a încărcătorului


NOTĂ

Utilizarea unor componente incompatibile poate duce la defecțiuni.

- Utilizați exclusiv sursa de alimentare și adaptorul specific țării respective furnizat odată cu încărcătorul.
- Utilizați doar cablul de alimentare USB furnizat împreună cu dispozitivul.
- Nu introduceți obiecte incompatibile sau străine în portul încărcătorului.
- Utilizați un adaptor de alimentare USB standard care acceptă o tensiune de ieșire de 5 V CC și un curent de ieșire de 0,5 până la 1 A.

Asiguraţi-vă că fişa electrică respectă cerinţele. Consultaţi secţiunea „Cerinţe pentru fişa electrică” din „Informaţii de siguranţă pentru încărcător”.

- Conectaţi partea USB-C a cablului de alimentare USB la portul USB al încărcătorului ❶.
- Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare USB la o fişă electrică adecvată ❷.

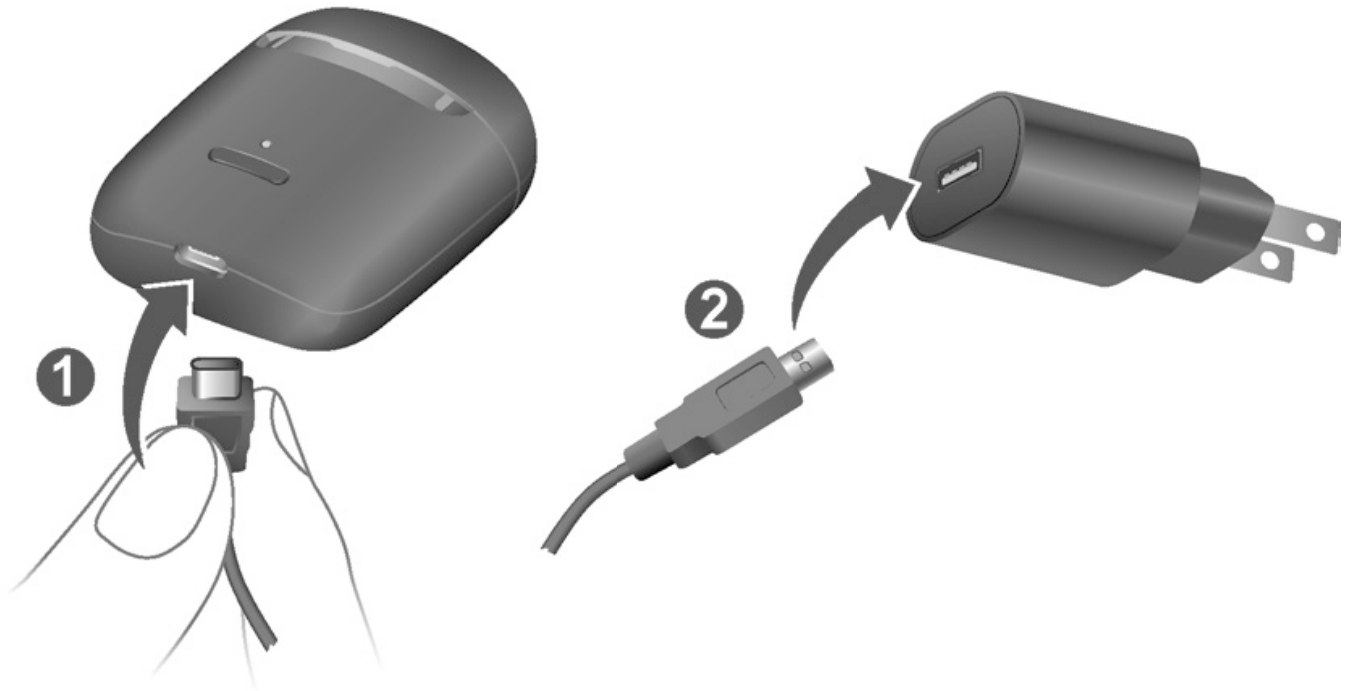

Bateria internă începe încărcarea. Când sunt introduse instrumentele auditive şi acestea încep să se încarce. Starea de încărcare a încărcătorului este afişată permanent.

Încărcarea bateriei interne cu încărcare wireless



- Aşezaţi încărcătorul pe un suport transmiţător wireless. După câteva secunde, bateria internă va începe încărcarea indicată de LED-ul verde intermitent al încărcătorului.

  Când sunt introduse instrumente auditive, va începe încărcarea acestora, de asemenea, indicată de LED-ul verde intermitent al LED-urilor instrumentelor


auditive. Dacă LED-ul este stins, vă rugăm să realiniaţi încărcătorul în centrul suportului transmiţătorului.

Starea de încărcare a încărcătorului este afişată până când este complet încărcată. După aceea, LED-urile sunt oprite din motive de economisire a energiei.

Starea de încărcare a încărcătorului

Ledul din față indică starea de încărcare a încărcătorului şi a bateriei sale interne.

Când bateria internă este încărcată, starea de încărcare este indicată în modul următor:

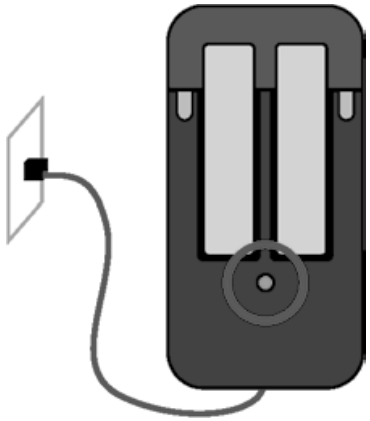


Descriere stare LED-uri
Verde intermitent Bateria internă este încărcată.
Verde Încărcătorul este complet încărcat.

Descriere stare LED-uri
LED-ul este oprit (încărcare wireless) Încărcătorul este complet încărcat.
Portocaliu intermitent Fază de răcire. Încărcarea este reluată când dispozitivul s-a răcit. Consultaţi secţiunea „Depanarea problemelor”.
Roşu intermitent Eroare încărcător. Consultaţi secţiunea „Depanarea problemelor”.

Pentru o vedere de ansamblu a stării de încărcare a instrumentelor auditive, consultaţi secţiunea „Încărcarea instrumentelor auditive”.

Verificarea capacităţii bateriei încărcătorului

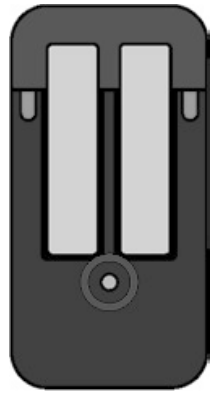

Pentru a verifica dacă bateria integrată a încărcătorului are o capacitate suficientă pentru a încărca instrumentele auditive complet, atunci când nu aveţi la dispoziţie o priză electrică:

- ▶ Deconectaţi încărcătorul de la priza electrică.
- ▶ Apăsaţi scurt butonul.

  LED-ul din faţă indică starea de încărcare a bateriei interne a încărcătorului timp de 7 secunde.

Descriere stare LED-uri
Verde Bateria internă are o capacitate suficientă pentru a încărca două instrumente auditive complet.

Descriere stare LED-uri
Portocaliu Bateria internă **nu** are o capacitate suficientă pentru a încărca două instrumente auditive complet.
Portocaliu intermitent Bateria internă a încărcătorului este descărcată. Încărcarea instrumentelor auditive nu este posibilă.

Dacă ledul de stare nu luminează când apăsaţi butonul, verificaţi următoarele:

- Încărcătorul este oprit. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul.
- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată pentru a afişa starea. Conectaţi încărcătorul la o priză electrică, aşteptaţi câteva minute şi încercaţi din nou.



Bateria internă are o capacitate de 400 mAh.

Întrebări puse frecvent

Probabil aveţi unele întrebări privind metoda optimă de încărcare a instrumentelor auditive. Citiţi întrebările şi răspunsurile de mai jos. Dacă aveţi şi alte întrebări, audiologul dumneavoastră vă va ajuta.



De ce nu pornesc instrumentele auditive când le scot din încărcător?

Verificaţi următoarele:

- Încărcătorul este oprit. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni încărcătorul. Consultaţi secţiunea „Pornirea sau oprirea încărcătorului”.

- Bateria internă a încărcătorului este prea descărcată. Conectaţi încărcătorul la o priză electrică.

Acum scoateţi instrumentele auditive din încărcător.



Cum pot opri instrumentele auditive fără să le încarc?

- ▶ Amplasaţi instrumentele auditive în încărcător. Asiguraţi-vă că acestea sunt introduse corect (ledurile de stare luminează). Instrumentele auditive sunt oprite automat şi încărcarea începe.
- ▶ Deconectaţi încărcătorul de la priza electrică.
- ▶ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a opri încărcătorul. Încărcarea se opreşte.

La ce trebuie să fiu atent/ă atunci când efectuez încărcarea?

Instrumentele auditive şi încărcătorul trebuie să fie curate şi uscate. Respectaţi condiţiile de operare din secţiunea „Condiţii de operare, transport şi depozitare”. Evitaţi încărcarea la temperaturi ridicate, deoarece aceasta poate scurta durata de viaţă şi capacitatea bateriei încorporate.

Dacă utilizaţi încărcătorul într-un mediu foarte cald, ţineţi cont de faptul că încărcarea se va opri dacă temperatura instrumentelor auditive sau a încărcătorului depăşeşte 42 °C (107 °F). LED-ul instrumentului auditiv şi/sau al LED-ului încărcătorului va lumina intermitent portocaliu în timpul fazei de răcire. Încărcarea este reluată automat după ce

dispozitivul s-a răcit. Nu atingeţi instrumentele auditive până când LED-urile din faţă nu luminează intermitent verde, deoarece acestea pot fi fierbinţi.

Întreţinere şi îngrijire

Curăţarea

NOTĂ

Risc de accidente cauzate de şocuri electrice!

- ▶ Dacă este necesară curăţarea, deconectaţi încărcătorul de la sursa de alimentare.

- ▶ Curăţaţi încărcătorul folosind un şerveţel moale şi uscat.
- ▶ Nu utilizaţi niciodată jet de apă şi nu introduceţi încărcătorul în apă.
- ▶ Nu sterilizaţi sau dezinfectaţi încărcătorul.

Întreţinere profesională

Audiologul dumneavoastră poate efectua întreţinea şi curăţarea completă profesională a instrumentului.

Solicitaţi audiologului dumneavoastră recomandări individuale privind intervalele de întreţinere, precum şi asistenţă.

Informaţii importante privind siguranţa

Informaţii privind siguranţa pentru bateriile reîncărcabile cu litiu-ion



AVERTISMENT

O baterie reîncărcabilă cu litiu-ion este permanent integrată în dispozitivul dumneavoastră. Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la explozia bateriei reîncărcabile cu litiu-ion.

Risc de rănire, incendiu sau explozie!

- ▶ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă pentru bateria reîncărcabilă cu litiu-ion din această secţiune.

AVERTISMENT

Risc de electrocutare!

- Conectaţi încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 60950-1 şi/sau IEC 62368-1.

AVERTISMENT

- Respectaţi condiţiile de operare.
- Acordaţi atenţie specială pentru a proteja dispozitivul împotriva căldurii extreme (de ex. flacără deschisă, cuptoare cu microunde, cuptoare cu inducţie sau alte câmpuri de înaltă inducţie) şi razele soarelui.
- Încărcaţi instrumentele auditive doar cu un încărcător aprobat. Solicitaţi asistenţă din partea audiologului dumneavoastră.
- Nu dezasamblaţi dispozitivul.
- Nu utilizaţi dispozitivul în atmosfere explozive.

- Nu utilizaţi dispozitive care sunt deformate sau au urme evidente de deteriorare.
- Nu utilizaţi dispozitivul dacă observaţi că performanţele acestuia se reduc considerabil după încărcare. Returnaţi dispozitivul audiologului dumneavoastră.
- Nu eliminaţi dispozitivul în foc sau în apă.

AVERTISMENT

- Înlocuirea şi repararea trebuie efectuate doar de către un profesionist. Aşadar:
- Nu reparaţi sau înlocuiţi dumneavoastră bateria reîncărcabilă cu litiu-ion.
- În cazul puţin probabil în care o baterie cu litiu-ion plesneşte sau explodează, ţineţi toate materialele combustibile la distanţă.

În oricare dintre cazurile de mai sus, returnaţi dispozitivul audiologului dumneavoastră.

Informaţii privind siguranţa pentru încărcător

Siguranţa personală pentru încărcător



AVERTISMENT

Risc de şoc electric!

- Nu utilizaţi dispozitive care sunt în mod evident defecte şi returnaţi-le la punctul de vânzare.



AVERTISMENT

Pericol de rănire!

- Nu utilizați dispozitive care sunt în mod evident defecte și returnați-le la punctul de vânzare.

AVERTISMENT

Vă rugăm să țineți cont de faptul că modificările neautorizate ale produsului pot cauza daune ale acestuia sau răni.

- Utilizați doar componente și accesorii aprobate. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.
- Nu modificați acest produs fără autorizație din partea producătorului.
- În cazul în care acest produs este modificat, trebuie efectuate inspecții și teste corespunzătoare pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului.

AVERTISMENT

Risc de explozie!

- Nu utilizaţi dispozitivul în atmosfere explozive (de. ex. în zone miniere).

AVERTISMENT

Risc de arsuri!

- Nu amplasați nimic altceva decât aparatele auditive în încărcător.

AVERTISMENT

Pericol de sufocare!

Dispozitivul dumneavoastră conține componente mici care pot fi înghițite.

- Nu lăsați aparatele auditive, bateriile și accesoriile la îndemâna copiilor și persoanelor cu dizabilități mintale.
- În cazul ingerării componentelor, adresați-vă imediat unui medic sau unei unități medicale.

AVERTISMENT

Sistemele de încărcare pot intra în interferenţă cu dispozitivele de măsurare şi echipamentele electronice.

- În spitale: Încărcătorul respectă standardele CISPR 35 şi CISPR 32. Drept urmare, utilizarea încărcătorului în spitale trebuie permisă. Totuşi, încărcătorul poate interfera cu anumite dispozitive extrem de sensibile. În astfel de cazuri, se vor lua măsuri corespunzătoare (mărirea distanţei faţă de dispozitivele sensibile sau deconectarea încărcătorului de la sursa de alimentare).

AVERTISMENT

Interferenţe cu dispozitivele implantabile

- Dispozitivul poate fi utilizat cu toate implanturile electronice care respectă standardul de compatibilitate electromagnetică ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 pentru implanturi umane.
- În cazul în care implantul dumneavoastră nu respectă standardul ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, consultaţi producătorul dispozitivului implantabil pentru informaţii privind riscul de perturbaţii.

NOTĂ

- Protejaţi dispozitivul împotriva căldurii extreme. Nu îl depozitaţi în lumina directă a soarelui.

NOTĂ

- Protejaţi dispozitivele împotriva umidităţii ridicate.

NOTĂ

- Nu uscaţi dispozitivele într-un cuptor cu microunde.

NOTĂ

Evitaţi scăparea pe jos. Componentele interne se pot defecta.

Cerinţe pentru fişa electrică

Utilizaţi o fişă electrică având o tensiune de ieşire de 5 V şi un curent de ieşire minim de 500 mA.



AVERTISMENT

Risc de electrocutare!

- Conectaţi încărcătorul doar cu o sursă de alimentare USB care respectă IEC 60950-1 şi/sau IEC 62368-1.

Informaţii suplimentare

Condiţii de operare, transport şi depozitare

Condiţii de operare	Încărcare USB	Încărcare wireless
Temperatură	10–35 °C 50–95 °F	10–30 °C 50–86 °F
Umiditate relativă	20–75%	20–75%
Presiune atmosferică	1050–1060 hPa	1050–1060 hPa

În timpul perioadelor prelungite de transport şi depozitare, vă rugăm să respectaţi următoarele condiţii:

	Depozitare	Transport
Temperatură	10–40 °C 50–104 °F	-20–60 °C -4–140 °F
Umiditate relativă	10–80%	5–90%
Presiune atmosferică	1050–1060 hPa	1050–1060 hPa

AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

- Livrați bateriile,aparatele auditive și/sau încărcătorul respectând reglementările locale.

Date tehnice privind sursa de alimentare

Tensiune de intrare:	100–240 V c.a.
Curent de intrare:	0,15–0,3 A
Frecvenţă de intrare:	50–60 Hz
Tensiune de ieşire:	5 V c.c.
Curent de ieşire:	1 A

Informaţii privind eliminarea

NOTĂ

- Reciclaţi dispozitivele şi ambalajele respectând reglementările naţionale.

NOTĂ

- Pentru a evita poluarea mediului, nu aruncaţi dispozitivele în gunoiul menajer.
- Reciclaţi sau eliminaţi dispozitivele în conformitate cu reglementările locale.

Explicarea simbolurilor

Simboluri utilizate în acest document	
	Indică o situaţie care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.
	Indică posibile daune materiale.
	Recomandări şi sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.
	Întrebări puse frecvent.

Simboluri utilizate în acest document

CE	Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene, consultaţi secţiunea „Informaţii privind conformitatea”.
	Indică producătorul legal al dispozitivului.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj

	Etichetă de conformitate pentru compatibilitate electromagnetică şi radiocomunicaţii Australia, consultaţi secţiunea „Informaţii privind conformitatea”.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj	
	Nu eliminaţi acest dispozitiv împreună cu deşeurile menajere generale. Citiţi mai multe în secţiunea „Informaţii privind eliminarea”.
	Ambalajele pot fi reciclate.
	Citiţi şi urmaţi instrucţiunile din ghidul de utilizare.
	A se păstra uscat în timpul transportului.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj	
	Temperatură în timpul transportului. Citiţi mai multe în secţiunea „Condiţii de operare, transport şi depozitare”.
	Umiditate relativă în timpul transportului. Citiţi mai multe în secţiunea „Condiţii de operare, transport şi depozitare”.
	Presiune atmosferică în timpul transportului. Citiţi mai multe în secţiunea „Condiţii de operare, transport şi depozitare”.
MD	Dispozitiv medical.

Simboluri de pe dispozitiv sau ambalaj

	Compatibil cu încărcătoare fără fir certificate Qi.*
	Bluetooth® tehnologie cu consum redus de energie.

* Logo-ul Qi este o marcă comercială a Wireless Power Consortium.

Depanarea pentru încărcător

Problema şi posibilele soluţii
Niciun LED nu se aprinde.
■ Verificaţi dacă sursa de alimentare este conectată corect.

Problema şi posibilele soluţii
LED-urile pulsează portocaliu.
Încărcătorul a atins limita de temperatură şi acum este în faza de răcire. Încărcarea este reluată după răcire (aproximativ 15 minute). ■ Nu atingeţi instrumentele auditive în timp ce LED-urile luminează intermitent în portocaliu. Instrumentele auditive pot fi fierbinţi. ■ În cazul în care încărcătorul intră în faza de răcire de mai multe ori în timpul încărcării, asiguraţi-vă că aşezaţi încărcătorul într-un mediu care respectă condiţiile de funcţionare recomandate.

Problema şi posibilele soluţii
LED-ul încărcătorului clipeşte roşu.
A apărut o eroare la nivelul încărcătorului. ■ Scoateţi instrumentele auditive din încărcător şi deconectaţi încărcătorul de la sursa de alimentare. ■ Reconectaţi încărcătorul la sursa de alimentare şi reintroduceţi instrumentele auditive în sloturile de încărcare. Dacă LED-urile clipesc în continuare roşu: ■ Scoateţi instrumentele auditive din încărcător şi deconectaţi încărcătorul de la sursa de alimentare. ■ Solicitaţi asistenţă din partea audiologului dumneavoastră.

Problema şi posibilele soluţii
LED-ul instrumentului auditiv clipeşte roşu.
A apărut o eroare la nivelul instrumentului auditiv. ■ Scoateţi instrumentul auditiv respectiv din încărcător şi deconectaţi încărcătorul de la sursa de alimentare. ■ Solicitaţi asistenţă din partea audiologului dumneavoastră.

Consultaţi tehnicianul acustician audioprotector dacă întâmpinaţi alte probleme.

Informaţii importante

Informaţii privind conformitatea pentru încărcător

Marcajul CE arată conformitatea cu următoarele directive şi regulamente europene:

- 2017/745 privind echipamentele medicale
- 2014/53/EU privind echipamentele radio
- 2011/65/EU privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase

Marcajul CE indică conformitatea cu anumite directive şi reglementări europene. Textul complet al declaraţiei de conformitate poate fi obţinut de la www.wsaud.com/other.

Acest dispozitiv este conform cu EN 55011:2016/A1:2017 Grupa 1 Clasa B.

Acest dispozitiv respectă Partea 18 din Regulile FCC şi CAN RSS-216 / CNR-216.

Operarea face obiectul următoarelor condiţii:

- acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare,
- acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, incluzând interferenţe care pot cauza operare nedorită şi
- utilizatorul trebuie să păstreze o distanţă minimă de 20 cm în timpul procesului de încărcare.

Informaţii specifice fiecărei ţări

Producător Legal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemarca

Document No. 04853-99T02-3B00 RO
Order/Item No. 210 186 24
www.wsaud.com
Master Rev02, 03.2023
© 04.2023, WSAUD A/S. All rights reserved

CE

www.wsa.com